

-
PREMIUM WHITENING

CAVE
B XITE & WHIT
E
ABCMASTERKIT

-

Profesionální systém profesionální systém profesionální systém

AT-HOME


INSTRUCTIONS

CAVEX


CAVEX BITE & WHITE ABC MASTERKIT

Návod k


A A c tivote s Cavex Bite & White StainLess

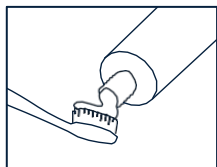

2.

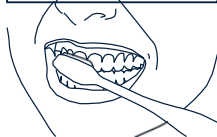


3.

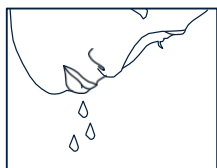


5.



B Rozjasněte se s bělícím gelem Cavex Bite & White

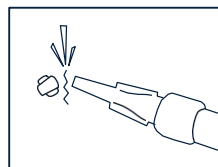

2.

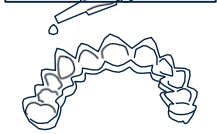

4.



5.



6.



7.




8.




Instr u kce v id e o


C Konditions Cavex Bite & White ExSe nse

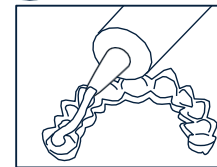

2.

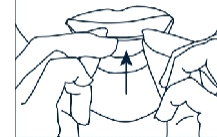

3.

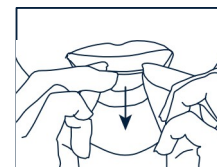

5.



CAVEX BITE&WHITE ABC MASTERKIT

Návod k



- NL Tray met spuiten in koelkast bewaren.
- DE Schale mit Spritzen im Kühlschrank aufbewahren.
- FR Conserver la gout tière avec les seringues au réfrigérateur.
- EN Zásobník s injekčními stříkačkami by měl být uchováván v chladničce.
- IT Conservare il vassoio con le siringhe nel frigorifero. Guardar las cubetas con las jeringas en el frigorífico. Tacu sa șpricama ținute în frigider.
- ES Conservare il vassoio con le siringhe nel frigorifero. Guardar las cubetas con las jeringas en el frigorífico. Tacu sa șpricama ținute în frigider.
- HR špricama čuvajte u hladnjaku.
- DK Opbevar tray med sprøjter i køleskab.
- HU A fogsínt a fecskendőket együtt a hűtőszekrényben kell tárolni.



- PL Tackę ze strzykawkami przechowywać w lodówce.
- PT Guardar a travessa com seringas no frigorífico. Förvara brickan med sprutor i kylen.
- SV brickan med sprutor i kylen.
- TR Şiringalı kalıbı buzdolabında saklayın.
- GR Φυλάξτε δισκάριο με σύριγγες στο ψυγείο. Лоток со шприцами хранить в холодильнике.
- RU со шприцами хранить в холодильнике.
- CN 模盘及其附带的填充料管应存放于冰箱内。
- AR 주사기가 있는 트레이는 냉장고에 보관하세요.
- لصينية و المحاقن الطبية في د.

Stručná referenční tabulka pokynů

NL GEBRUIKS INSTRUCTIES	A - ACTIVEREN - CAVE X BITE & WHITE STAINLESS				B - BLEKEN - CAVE X BITE & WHITE		
1 Breng Cavex Bite&White Stainless aan op de tandenborstel.	2 Básićni de tanden grondig.	3 Poets de tanden minstens 2 tot 3 minut.	4/5 Spuw overtollig materiaal uit. Niet met water spoelen.	1 Breek de punt van de spuit af.	2 Laet voor elke tand 1 druppel Bite&White gel in de bleektray vallen.	3 Breng de bleektray in de mond aan.	
DE GEBRAUCHSANWEISUNG A - AKTIVIEREN - CAVE X BITE & WHITE STAINLESS					B - BLEICHEN - CAVE X BITE & WHITE		
1 Tragen Sie Cavex Bite&White StainLess auf ihrer Zahnbürste auf.	2 Putzen Sie die Zähne gründlich.	3 Putzen Sie die Zähne mindestens 2 bis 3 Minuten.	4/5 Spucken Sie überschüssiges Material aus. Nicht mit Wasser spülen.	1 Brechen Sie das obere Ende der Spritze ab.	2 Geben Sie für jeden Zahn 1 Tropfen Bite&White Bleichgel in die Schiene.	3 Nehmen Sie die Bleichschiene in den Mund.	
FR MODE D'EMPLOI	A - AKTIVACE - KAVE X BITE & VÝSTAVBA				B - BLANCHIMENT - CAVE X BITE & WHITE		
1 Appliquez Cavex Bite&White StainLess na brosse à dents.	2 Brossez-vous les dents soigneusement.	3 Brossez-vous les dents pendant au moins 2 à 3 minutes.	4/5 Crachez l'excédent de produit. Ne vous rincez pas la bouche à l'eau.	1 Cassez la pointe de la seringue.	2 Versez dans la gouttière 1 goutte de gel Bite&White par dent.	3 Insérez la gouttière dans la bouche.	
VÝZNAMNÉ STRUKTURY	A - DEJINOST-KAVEBNISTAVBYASTAVEBNISTAVBY				B - BRIGTEN - CAVE X BITE & WHITE		
1 Dávkujte prípravok Cavex Bite&White StainLess na zubní kartáček.	1 Důkladně čistěte zubů Nezapomínejte	2 Zubu čistěte alespoň 2-3 minuty	4/5 Vyplivněte přebytečný materiál.	1 Odolme špičku stříkačky	2 Dávkujte 1 kapku bělicho přípravku Bite&White gel do zásobníku pro každý zub	3 Vložte bělicí miskou do úst.	
IT ISTRUZIONI	A - ATTIVAZIONE - CAVE X BITE & WHITE STAINLESS				B - SBIANCAMENTO - CAVE X BITE & WHITE		
1 Mettere Cavex Bite&White StainLess sullo spazzolino da denti.	2 Pulire accuratamente i denti.	3 Pulire i denti per almeno 2 - 3 minuti.	4/5 Sputare il materiale in eccesso. Non sciacquare con acqua.	1 Rompere la punta della siringa.	2 Per ogni dente fare cadere 1 goccia di gel Bite&White nella mascherina apposita.	3 Mettere in bocca la mascherina.	
ES INSTRUCCIONES	A - ACTIVACIÓN - CAVE X BITE & WHITE STAINLESS				B - BLANQUEAMIENTO - CAVE X BITE & WHITE		
1 Ponga Cavex Bite&White StainLess en el cepillo.	2 Cepille los dientes a fondo.	3 Cepille los dientes al menos durante 2-3 minutos.	4/5 Escupa todo el material excesivo. No enjuague con agua	1 Rompa la punta de la jeringa.	2 Administre para cada diente 1 gota de gel de blanqueamiento Bite&White en la cubeta.	3 Coloque la cubeta de blanqueamiento en la boca.	
HR INSTRUKCIJE	A - AKTIVACE - KAVE X BITE & WHITE STAINLESS				B - BLANQUEAMIENTO - CAVE X BITE & WHITE		
1 Nanesite Cavex Bite&White StainLess na četkicu za zube.	1 Temeljito operite zube.	3 Perite zube najmanje 2-3 minute.	4/5 Ispljunite višak materijala. Ne ispirajte usta vodom.	1 Otkinite vrh šprice.	2 Za svaki zub nakapajte 1 kap Bite&White gela za izbjeljivanje u udlagu.	1 Unesite udlagu za izbjeljivanje u usta.	
DK BRUGSINSTRUKTIONER	A - AKTIVERING - CAVE X BITE & WHITE STAINLESS				B - BLEGNING - CAVE X BITE & WHITE		
1 Píneste si Cavex Bite&White StainLess na tandebørsten.	1 Børst tanderne grundigt.	3 Børst tanderne mindst 2 til 3 minutter.	4/5 Spyt overflødig rester ud. Skyld ikke med vand!	1 Afbræk spidsen på sprøjten.	2 Lad for hver tand 1 dråbe Bite&White gel falde i blegningske.	3 Anbring skeen i munden.	
HU HASZNÁLATI	A - AKTIVÁLÁS - CAVE X BITE & WHITE STAINLESS				B - FEHÉRTÉS - CAVE X BITE & WHITE		
1 Nyomjon ki a Cavex Bite&White StainLess krémből a fogkefére	1 Alaposan dörzsölje át a fogakat	3 Tisztítsa a fogakat legalább 2-3 percen át	4/5 A fölösleges anyagot köpje ki. Ne öblítsen vízzel	1 Törje le a fecskendő végét	2 Cseppentsen a sinbe minden foghoz 1 csepp Bite&White fehértítő gél	1 Helyezze be a fehértítő sínt a szájába	
PL INSTRUKCJE	A - AKTYWACJA - CAVE X BITE & WHITE STAINLESS				B - WYBIELANIE - CAVE X BITE & WHITE		
1 Nalozyc Cavex Bite&White StainLess na szczoteczke do zebow.	2 Dokladnie umyc zebny.	3 Myc co najmniej przez 2-3 minuty.	4/5 Wypoluc resztki materialu. Nie plukac zebow wodą.	1 Odlamac końcówkę strzykawki.	2 Do każdego zęba nalożyć na taczkę 1 kroplę żelu do wybielania Bite&White.	3 Włożyć taczkę do ust.	
PT INSTRUKCJE	A - ATIVAÇÃO - CAVE X BITE & WHITE STAINLESS				B - BRANQUEAMENTO - CAVE X BITE & WHITE		
1 Coloque Cavex Bite&White StainLess na escova de dentes	2 Escove os dentes cuidadosamente	3 Escove os dentes durante pelo menos 2 a 3 minutos	4/5 Cuspa o produto em excesso. Não enxaguar com água	1 Parta o bico da seringa	2 Coloque 1 gota de gel de branqueamento Bite&White na moldeira, para cada dente	1 Insira a moldeira de branqueamento na boca	
SV BRUKSANVISNING	A - AKTIVERIZACE - KAVE X BITE & VŠECHNYSTANOVIŠTĚ				B - BLEKNICE - KAVE X BITE & WHITE		
1 Vyzkoušejte Cavex Bite&White StainLess na tandemu	1 Borsta tänderna noga	3 Borsta tänderna i minst 2-3 minuter	4/5 Spotta ut allt överflödigt material. Skölj inte med vatten	1 Britänne ve spetsen på sprutan	2 Kapky 1 kapka Bite&White gelu na jednu kapku na blekningsbrickan	3 För in blekningsbrickan i munnen	
TR HASTALAR	A - ETKİLEŞİM (AKTİVE ETME) - CAVE X BITE & WHITE STAINLESS				B - AŞARTMA - CAVE X BITE & WHITE		
1 Cavex Bite&White StainLess'i diş fırçasına koyunuz. (sürtünüz.)	2 Dişleri iyice fırçalayınız.	3 Dişleri en az 2-3 dakika temizleyiniz.	4/5 Fazladan(Fazlalık) maddeleri tükürerek atınız. Su ile durulamayınız.	1 Şırınganın ucunu kırmız	2 Her diş için kalıba 1 damla Bite&White beyazlatma jeli aktınız.	3 Beyazlatma kalibrini(plağimi) ağızınıza koyunuz.	
GR ΟΔΗΓΙΕΣ	A - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ - CAVE X BITE & WHITE STAINL				B - ΛΕΥΚΑΝΣΗ - CAVE X BITE & WHITE		
1 Βάλτε Cavex Bite&White StainLess στην οδοντόβουρσα	2 Βουρσίστε πολύ καλά το δόντι	3 Καθίστε τα δόντια επί 2-3 λεπτά τουλάχιστον	4/5 Φιτσίτε όσο υλικό ενδεχομένως περισσέψει. Μη ξεπλύνετε με νερό	1 Σπάστε την άκρη της σύριγγας	2 Βάλτε στο διακόρι για κάθε δόντι 1 σταγόνα λευκατικού gel Bite&White	1 Εισάγετε το λευκατικό διακόρι στο στόμα	
RU ИНСТРУКЦИЯ	A - АКТИВАЦИЯ - CAVE X BITE & WHITE STAINL				B - ОТБЕЛИВАНИЕ - CAVE X BITE & WHITE		
1 Нанесите пасту Breng Cavex Bite&White StainLess на зубную щетку.	2 Тщательно почистите зубы.	3 Чистка зубов должна занять не менее 2 - 3 минуты.	4/5 Выплните оставшийся во рту продукт. Не прополаскивать водой!	1 Осломите наконечник шприца.	2 Нанесите по 1 капле геля Bite&White на Vpadát to, že je pro vás těžké.	3 Наденьте капу на зубы.	
CN 说明书	A - 清潔 - CAVE X BITE & WHITE STAINL				B - 美白 - CAVE X BITE & WHITE		
1 把Cavex Bite&White StainLess擠到牙刷上	2 徹底刷牙	3 至少刷牙2-3分鐘	4/5 將多餘的Cavex Bite&White StainLess吐出。請勿再用水漱口!	1 打開美白劑的蓋子	2 在美白牙托內部每一顆牙齒的位置上放入一滴約綠豆大小的Bite&White美白劑	3 把美白牙托戴入口中相對應的牙齒	
KO 사용자 설명서	A - 활성화 (AKTIVACE) - CAVE X BITE & WHITE STAINL				B - 미백 (BRIGTEN) - CAVE X BITE & WHITE		
1 Cavex Bite&White StainLess를 칫솔에 묻힌다	1 구석구석 치아를 닦는다	3 적어도 2-3분 동안 양치질을 한다	4/5 남은 초과제제를 뱉어낸다. 물로 헹구지 말 것	1 주사기 끝에서 팁을 떼어낸다	2 Bite&White 미백 겔을 트레이에 1~2방울씩 떨어뜨린다	1 미백 트레이를 입에 넣어 착용한다	
A	تعليمات استعمال StainLess-Cavex Bite&White				تعليمات		
1 مع فرككس بايت اند وايت ستينليس على فرشاة الأسنان أولاً	2 اغسل الأسنان بعمق	3 اغسل الأسنان لمدة ثلاثين من إلى ثلاثين دقيقة	4/5 ابق الكمية الزائدة من المادة من الفم لا تشطف الفم	1 اكسر الجزء العلوي من الحقناتيل مبيدة	2 انزل من الحقنة قطرة واحدة لكل من جلابن اند	3 ضع صبة البيض في الفم	

K-KONDITIONEREN-KAVEXBITEAVÝSLEDKY				
4 Houd de bleektray 30 tot 60 minuten in de mond.	5/6/7 Mond grondig uitspoelen met water.	8 Spoel de bleektray af met koud water.	1 Breng Cavex Bite&White ExSense in de bleektray aan.	2 Breng de bleektray in de mond aan.
3 Houd de bleektray 5 tot 10 minuten in de mond.	4/5 Spuw overtollig materiaal na 5 minuten uit. Niet met water spoelen!			
C-KONDITIONALIZACE-KAVEXBITUAVÝSLEDKŮM				
4 Behalten Sie die Schiene 30 bis 60 Minuten im Mund.	5/6/7 Spülen Sie den Mund gründlich mit Wasser aus.	8 Spülen Sie die Bleichschiene mit kaltem Wasser aus.	1 Füllen Sie Cavex Bite&White ExSense in ihre Schiene.	2 Nehmen Sie die Bleichschiene in den Mund.
3 Behalten Sie die Schiene 5 bis 10 Minuten im Mund.	4/5 Spucken Sie nach 5 bis 10 Minuten das überschüssige Material aus. Nicht mit Wasser spülen!			
4 Gardez la gouttière dans la bouche pendant 30à60minutes.	5/6/7 Rincez-vous abondamment la bouche à l'eau.	8 Rincez la gouttière à l'eau froide.	dans la gouttière.	
3 Houd de bleektray 5 tot 10 minuten in de mond.	4/5 Spuw overtollig materiaal na 5 minuten uit. vous rincez pas la bouche à l'eau!			
4 Podložku ponechte v ústech po dobu 30 až 60 minut.	5/6/7 Důkladně vypláchněte ústa vodou.	8 Opláchněte bělicí zásobník studenou vodou ExSense	do zásobníku.	
3 Houd de bleektray 5 tot 10 minuten in de mond.	4/5 Spuw overtollig materiaal na 5 minuten uit. materiał. Nieopłuczajcie wodą!			
C-KONDITIONAMENTO VANI-KAVEXBITUAVEXSENSE				
4 Mascherina in bocca udržujte 30 až 60 minut.	5/6/7 Sciacquare accuratamente la bocca con acqua.	8 Sciacquare la mascherina con acqua fredda.	1 Mettere in bocca la mascherina.	2 Mettere in bocca la mascherina.
3 Tenere la mascherina in bocca per 5 - 10 minuti.	4/5 Dopo 5 minuti spolare il materiale in eccesso. Non sciacquare con acqua.			
C-KONDITIONAMTENA-KAVEXBITUAVÝSLEDKŮM				
4 Deje la cubeta en la boca durante 30 a 60 minutos.	5/6/7 Enjuague la boca abundantemente con agua.	8 Vyčistěte kostku blanqueamiento pomocí friské vody.	1 Deje la cubeta en la boca.	2 Coloque la cubeta de blanqueamiento en la boca.
3 Deje la cubeta en la boca durante 5 a 10 minutos.	4/5 Después de 5 a 10 minutos, escupa todo el material excesivo. ¡No enjuague con agua!			
C-KONDITIONAMTENA-KAVEXBITUAVÝSLEDKŮM				
4 Držte udlagu 30-60 minuta u ustima.	5/6/7 Temeljito isperite usta vodom.	8 Udlagu isperite hladnom vodom.	1 Na udlagu stavite Cavex Bite&White ExSense.	2 U usta stavite Cavex Bite&White ExSense.
3 Držte udlagu 5-10 minuta u ustima.	4/5 Isperite usta vodom. ispirite usta vodom!			
4 Behold skeen 30 til 60 minutter i munden.	5/6/7 Skyld munden grundigt med vand.	8 Skyld tray af med koldt vand.	1 Sæt skeen i munden.	2 Sæt skeen i munden.
3 Behold skeen 5 til 10 minutter i munden.	4/5 Skyl munden grundigt med vand. Skyld ikke med vand!			
4 Tartsa a tálcát a szájjában 30-60 percen át	5/6/7 Alaposan öblitse ki a száját vízzel	8 Öblitse ki a fehéritő színt hideg vízzel	1 Tegye a tálcát a szájába.	2 Tegye a tálcát a szájába.
3 Tartsa a tálcát a szájjában 5-10 percen át.	4/5 Öblítse ki a tálcát vízzel. öblítsen vízzel!			
4 Trzymać tackę w ustach przez 30 do 60 minut.	5/6/7 Dokładnie przepłukać zęby wodą.	8 Zmyć tackę zimną wodą.	1 Włożyć tackę do ust.	2 Włożyć tackę do ust.
3 Trzymać tackę 5 do 10 minut w ustach.	4/5 Dokładnie przepłukać zęby wodą. zębów wodą!			
4 Ponechte moldeira na boca po dobu 30 až 60 minut	5/6/7 Enxague a boca cuidadosamente com água	8 Enxague a moldeira de branqueamento com água fria	1 Coloque a moldeira na boca.	2 Coloque a moldeira na boca.
3 Ponechte moldeira na boca po dobu 5 až 10 minut.	4/5 Enxague a boca cuidadosamente com água. enxaguar com água!			
4 Håll brickan i munnen i mellan 30 och 60 minuter	5/6/7 Skölj munnen noga med vatten	8 Skölj av blekningsbrickan med kallt vatten	1 Sätt brickan i munnen.	2 Sätt brickan i munnen.
3 Håll brickan i munnen i mellan 5 och 10 minuter.	4/5 Skölj munnen grundigt med vatten. munnen sköljs inte med vatten!			
4 Kalib(Plaği) 30 İla 60 dakika arasında ağzınızda tutunuz.	5/6/7 Ağzınıza suyla iyice durulayınız.	8 Beyazlatma kalibini(plağini) soğuk suyla durulayınız.	1 Kalib(Plaği) ağızınıza sokunuz.	2 Kalib(Plaği) ağızınıza sokunuz.
3 Kalib(Plaği) 5 İla 10 dakika arasında ağızınızda tutunuz.	4/5 Ağzınıza suyla iyice durulayınız. soğuk suyla durulayınız!			
4 Крoпите по дискорю στο στόμα επί 30 έως 60 λεπτά	5/6/7 Στεγνώνετε πολύ καλά το στόμα με νερό	8 Στεγνώνετε το λευκαντικό дискорю με κρύο νερό	1 Βάλετε Cavex Bite&White ExSense στο στόμα.	2 Βάλετε Cavex Bite&White ExSense στο στόμα.
3 Крoпите по дискорю στο στόμα επί 5 έως 10 λεπτά.	4/5 Στεγνώνετε πολύ καλά το στόμα με νερό. στεγνώστε καλά το στόμα με νερό!			
4 Оставьте капю во рту на 30 - 60 минут.	5/6/7 Тщательно прополоскать рот.	8 Проглутть капю холодной водой.	1 Вставьте Cavex Bite&White ExSense на капю для отбеливания.	2 Вставьте Cavex Bite&White ExSense на капю для отбеливания.
3 Оставьте капю во рту на 5 - 10 минут.	4/5 Тщательно прополоскать рот. рту продукт. Не прополаскивать водой!			
4 讓美白牙托固定在牙齒上30-60分鐘	5/6/7 用清水徹底漱口	8 用清水沖洗美白牙托	1 將美白牙托固定在牙齒上。	2 將美白牙托固定在牙齒上。
3 讓美白牙托固定在牙齒上5-10分鐘	4/5 用清水徹底漱口。 ExSense。請勿再用水漱口!			
4 트레이를 입에 넣은 상태로 30-60분 정도 유지한다	5/6/7 구석구석 입안을 물로 헹군다	8 미백 트레이를 찬물로 헹군다	1 트레이를 입에 물린다	2 트레이를 입에 물린다
3 트레이를 입에 넣은 상태로 5-10분 정도 유지한다	4/5 구석구석 입안을 물로 헹군다. 또 헹구지말 것!			

Cavex Bite&White ABC-Masterkit:
Thuisbleekstelsysteem in 3 stappen

**SEŠIJTE= ACTIVEREN:
CAVEX BITE&WHITE STAINLESS**

OMSCHRIJVING

Tandbleekactivator & pasta voor vlekken verwijdering. Verwijdert oppervlakkige vlekken en plak van tanden. Versterkt bleekbehandelingen dankzij verhoging van pH-waarde in de mond.

VERPAKKING

Tuba 35 ml - 50 gr
- Mírná abrazé glazury / dentinu.
- Hoge reinigende en polijstende waarde.
- Verhoogt de pH-waarde in de mond als voorbehandeling voor bleken.
- Niet bedoeld voor frequent gebruik.

BESTANDDELEN VAN CAVEX BITE&WHITE STAINLESS

Aqua, Sorbitol, Gehydrateerde silicaat, Glycerine, Erythritol, Lithiummagnesiumnatriumsilicaat, Poloxameer, Natriumhexametofosfaat, Cellulosegom, Xanthaangom, Fenoxxyethanol, Natriumsaccharine, Muntaroma, Limoneen, Cl 42090

STAP B= BLEKEN: CAVEX BITE&WHITE

OMSCHRIJVING

Waterstofperoxide dient als bleekmiddel in Cavex Bite&White. Het wordt toegevoegd als carbamidperoxide om een voldoende stabiel product te verkrijgen. De carbamidperoxide lost snel op in zuurstofradicalen en water. Tijdens het bleekproces vallen de vrije radicalen de dubbele koolstofverbindingen aan; deze vormen meestal de bron van tandverkleuring.

VERPAKKING

- 3 Cavex Bite&White 3 ml-spuiten

AKTIEVE BESTANDDELEN VAN CAVEX BITE&WHITE

- 16 % karbamidperoxid - gelijk aan 6 % waterstofperoxide

- 0,2 % Kaliumnitraat-desenzibilizator
- 0,1 % Natriumfluorid-desenzibilizator

BESTANDDELEN VAN CAVEX BITE&WHITE

Karbamidperoxid, kaliumnitraat, natriumfluorid, karbomer, glycerin, EDTA, kaliumhydroxid, pepermuntolie, voda.

INDICATIES VOOR GEBRUIK

Cavex Bite&White is een gel om tanden wit te kleuren, waarbij de kleur van natuurlijke tanden

wordt bleekert. Cavex Bite&White mag alleen in opdracht van een tandheelkundige worden verstrekt. Een consult bij een bevoegde tandarts vóór elke bleekbehandeling wordt aanbevolen om mond- of gezondheidsproblemen uit te sluiten.

KONTRAINDIKACE

Er wordt aanbevolen om in onderstaande gevallen een arts te raadplegen:
- bij zwangere vrouwen, en vrouwen die borstvoeding geven;
- bij personen die worden behandeld voor een ernstige ziekte;
- bij kinderen jonger dan 18 jaar.

KLINICKÝ POSTUP

- Leg de uitgangskleur vast, evalueer de huidige gezondheid van het gebit en zorg er voor dat de verwachtingen van de patiënt over het eindresultaat realistisch zijn.
- Provisorische of tijdelijke gebitsrestauraties kunnen tijdens het bleekproces verkleuren, terwijl composiet- of polycarbonaat materiaal niet wordt beïnvloed.
- Aan patiënten met composietrestauraties dient dan ook te worden meegedeeld dat bestaande composieten wellicht moeten worden vervangen, aangezien alleen natuurlijke tanden witter worden.
- Wacht bij patiënten die een esthetische of adhesieve restauratie nodig hebben, 2 weken na de laatste bleekbehandeling; de kleur kan zich dan stabiliseren.
- Alle restauraties dienen intact te zijn, of goed geseald met de juiste tijdelijke materialen.
- Het gebruik van een tandpasta voor gevoelige tanden, 2 weken voor de behandeling tot 2 weken daarna, dient te worden aanbevolen.
- U dient de patiënt altijd te waarschuwen voor gevoeligheid van de tanden of geïrriteerd tandvlees tijdens de behandeling. Het tandvlees dat met het middel in aanraking komt, kan rood of wit worden, maar krijgt na enkele dagen zijn normale kleur weer terug.
- Adviseer de patiënt - om irritatie van zacht weefsel te voorkomen - om de bleektray niet te overladen, om overtollige gel weg te vegen aan de grens van het tandvlees en om de

mond na de behandeling grondig te spoelen.
- Wijs de patiënt er op dat het dopje na elke behandeling weer op de spuit moet worden geplaatst.
- De patiënt mag minstens 30 minuten na elke behandeling niet eten, drinken of roken.
- Instrueer de patiënt om de behandeling te stoppen en onmiddellijk contact met u op te nemen als er zich een probleem voordoet.
- De uiteindelijke kleur komt circa 2 weken na het begin van de behandeling tot stand. Na

de behandeling dient een vervolgspraak te worden gemaakt.

WAARSCHUWINGEN

- Bevat fluoride.
- Bevat vodní peroxid.
- Vermijd contact met de ogen.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Niet gebruiken bij overgevoelige tanden.
- Niet eten, drinken of roken tijdens het dragen van de op maat gemaakte bleektrays.
- Gevaarlijk bij inslikken.

INSTRUCTIES VOOR EERSTE HULP

- Bij inslikken van een grote hoeveelheid gel (meer dan 25% van de gel in de spuit: meteen water drinken, niet geforceerd overgeven en een arts raadplegen.
- Indien er gel in de ogen komt: oogleden optrekken, het oog minstens 15 minuten achter elkaar met water spoelen en een arts raadplegen.
- Bij contact met kleding, huid of haar: aangetaste kleding verwijderen en huid of haar spoelen met veel water.

MOGELIJKE SCHADELIJKE EFFECTEN

Schadelijke effecten die kunnen samenhangen met het gebruik van Cavex Bite&White zijn onder andere, maar niet uitsluitend:
- Gevoelige tanden
- Sommige patiënten kunnen tijdens de behandeling extra gevoeligheid van de tanden voor - Na het bleken van tanden op kantoor en/of thuis Zij ontslaan u niet van de verplichting, de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procedés en doeleinden te controleren.
- Voorkomen en beheersen van gevoeligheid
- Irritatie van het tandvlees
- Bleektrays die zich uitstrekken tot het tandvlees, kunnen een matige tot ernstige irritatie van zacht weefsel veroorzaken. Indien de bleektrays goed passen, controleer dan of de patiënt de correcte hoeveelheid op de juiste manier verwerkt. Wellicht dient de

patiënt de hoeveelheid gel in de bleektrays te de gel verminderen.

BEWAARADVISIES

- Gekoeld (<8°C) bewaren op een donkere, droge plaats.
- Gebruik het product niet na overschrijding van de houdbaarheidsdatum.

VERWIJDERING

- Verwijder het product conform de lokale afvalregels.

**STAP C= CONDITIONEREN:
CAVEX BITE&WHITE EXSENSE**

OMSCHRIJVING

Cavex Bite&White ExSense je gel na vodní bázi s muntsmaakem a obsahuje Hydroxyapatiet en Kalisalpeteer. Cavex Bite&White 5. Gebruik het product 10 dagen lang elke dag, of volg de instructies van uw tandheelkundig adviseur.
ExSense vermindert de gevoeligheid en maakt tanden witter dankzij re-mineralisatie van Hydroxyapatiet.

VERPAKKING

Tuba 42 ml - 50 gr (voldoende voor circa 20 behandelingen)

KOPYTNÍČKŮVBEST ADELEN VAN CAVEX BITE&WHITE EXSENSE:

Hydroxyapatiet 2%, Kaliumnitraat 0,1%

SAMENSTELLING

Aqua, Gehydrogeneerde zetmeelhydrolysaat (sorbitol), Glycerine, Erythritol, Lithiummagnesiumnatriumsilicaat, Hydroxyapatiet, Kaliumchloride, Kaliumnitraat, Fenoxxyethanol, Xanthaangom, Tetrasodium pyrofosfaat, Wijnsteenzuur, Muntaroma, Natriumsaccharine.

INDICATIES VOOR GEBRUIK

- Voorkomen en beheersen van gevoeligheid

KONTRAINDIKACE

Gebruik Cavex Bite&White ExSense niet bij een allergie voor munt of een van de bestanddelen. onder uw eigen verantwoordelijkheid.

POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZKY (PROCEDURE VOOR GEBRUIK)

1. Tandens voorbereiden en reinigen door borstelen en flossen.
2. Toepassing:

Zonder bleektray:
Was de handen grondig met water en zeep. Breng een kleine hoeveelheid Cavex Bite&White ExSense op een schone vinger aan. Verdeel

Was de handen grondig met water en zeep. Breng een kleine hoeveelheid Cavex Bite&White ExSense op een schone vinger aan. Verdeel het rustig over alle vlakken van de boven- en ondertanden. Laat de gel 5 à 10 minuten inwerken. Spuw eventuele overtollige gel uit en spoel de mond niet met water.

Setkal se s bleektray:

Breng een strookje Cavex Bite&White ExSense aan op de gehele bleektray. Breng de bleektray in en draai deze rustig naar links en rechts, zodat de gel goed over de tanden wordt verdeeld. Bijt dan langzaam op de

bleektray en laat de gel 5 à 10 minuten inwerken. Verwijder de bleektray, spuw eventuele overtollige gel uit en spoel de mond niet met water. Spoel de bleektray af met koud water.

3. Draai de dop na gebruik altijd meteen op de tube.
4. Pro optimální výsledky: minstens 30 minut na de behandeling niet eten of drinken.

WAARSCHUWINGEN & EHBO-INSTRUCTIES

Bij contact met de ogen: grondig spoelen met veel water en medische hulp inroepen. Gebruik het product niet na overschrijding van de

houdbaarheidsdatum.

BEWAARADVISIES

Bewaren op een koele, droge (vorstvrije) plaats, beschermd tegen direct zonlicht.

Výrobce: Cavex Holland BV

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschreven of door middel van proeven worden naar beste weten verstrekt, doch gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen, ook ten aanzien van eventuele beschermende rechten van derden. U niet van de verplichting, de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procedés en doeleinden te controleren. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vinden plaats buiten onze Kontrolóval ísem to. Zij vallen derhalve buiten onze aansprakelijkheid. In geval van enige aansprakelijkheid blijft deze, voor alle schadegevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en door u gebruikte goederen. Vanzelfsprekend garanderen wij de goede kwaliteit van onze producten, napf. volgens de in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven.

Cavex Bite&White ABC Master Kit:
3-Schritt-Bleichsystem für den Hausgebrauch

SCHRITT A= AKTIVIEREN: CAVEX BITE&WHITE STAINLESS

BESCHREIBUNG

Zahnaufhellungs-Aktivator & Paste zum Entfernen von Flecken. Entfernt oberflächliche Flecken und Zahnbelag von den Zähnen. Verstärkt Bleichbehandlungen durch Optimierung des pH-Wertes im Mund.

VERPACKUNG

- Tuba 35 ml - 50 g
- Leicht abrasiv für Zahnschmelz und Dentin.
- Hohe Reinigungs- und Polierleistung.
- Erhöht den pH-Wert im Mund als Vorbehandlung - Legen Sie die Ausgangsfarbe fest, bewerten Sie die Gesundheit des Gebisses und sorgen Sie dafür, dass die Erwartungen des Patienten im Hinblick auf das Endergebnis realistisch sind.
- Nicht zum häufigen Gebrauch vorgesehen.

BESTANDTEILE VON CAVEX BITE&WHITE STAINLESS

Aqua, Sorbitol, hydratisierte Kieselerde, Glycerin, Erythrit, Lithium Magnesium Natriumsilikat, Poloxamer, Natriumhexametaphosphat, Celulosegummi, Xanthangummi, Fenoxylethanol, Natrium-Saccharin, Minze-Aroma, Limonene, CI 42090

SCHRITT B= BLEICHEN: CAVEX BITE&WHITE

BESCHREIBUNG

Wasserstoffperoxid wird als Bleichmittel in Cavex Bite&White verwendet. Es wird als Carbamid Peroxid hinzugefügt, um ein ausreichend stabiles Produkt zu erhalten. Das Carbamid Peroxid löst sich schnell in Sauerstoffradikalen und Wasser auf. Während des Bleichprozesses greifen die freien Radikale die doppelten Kohlenstoffverbindungen an. Diese sind in den meisten Fällen die Ursache der Zahnverfärbung.

VERPACKUNG

- Cavex Bite&White 3 ml-Spritzen

BESTANDTEILE VON CAVEX BITE&WHITE ACTIVE

- 16 % karbamidperoxid - entspricht 6 % Wasserstoffperoxid
- 0,2 % Kaliumnitrat-Desensitizer
- 0,1 % Natriumfluorid-desenzibilizator

ZUSAMMENSETZUNG

Karbamid peroxid, kaliumnitrat, natriumfluorid, karbomer, glycerin, EDTA, kaliumhydroxid, Pfefferminzöl, Wasser.

ANGABEN ZUR VERWENDUNG

Cavex Bite&White ist ein Gel zur Aufhellung der Zähne, wobei die Farbe natürlicher

Zähne aufgehell wird. Cavex Bite&White darf ausschließlich auf Rezept eines Zahnarztes ausgegeben werden. Vor jeder Bleichbehandlung wird eine Beratung durch einen qualifizierten Zahnarzt empfohlen, um Mund- oder Gesundheitsprobleme auszuschließen.

GEGENANZEIGEN

- In folgenden Fällen wird empfohlen, einen Arzt aufzusuchen:
- bei schwangeren und stillenden Frauen
- bei Personen, die für eine ernsthafte Krankheit behandelt werden
- bei Kindern unter 18 Jahren

KLINISCHE TESTY

Sie die Ausgangsfarbe fest, bewerten Sie die Gesundheit des Gebisses und sorgen Sie dafür, dass die Erwartungen des Patienten im Hinblick auf das Endergebnis realistisch sind. Provisorische oder vorübergehende Gebissrestaurationen können sich beim Bleichprozess verfärben, während Komposit- oder Polykarbonatmaterial nicht beeinflusst wird. Deshalb müssen Patienten mit Kompositrestaurationen informiert werden, dass vorhandene Komposite eventuell ersetzt werden müssen, da nur die natürlichen Zähne weißer werden.

- Warten Sie bei Patienten, die eine ästhetische oder adhäsive Restauration benötigen, bis 2 Wochen nach der letzten Bleichbehandlung verstrichen sind. Die Farbe kann sich dann stabilisieren. Alle Restaurationen müssen intakt oder mit den richtigen vorübergehenden Materialien gesealt sein.

- Es ist zu empfehlen, 2 Wochen vor und bis 2 Wochen nach der Behandlung eine Zahncreme - Empfindlichkeit für empfindliche Zähne zu verwenden.

- Weisen Sie die Patienten ausdrücklich auf die Empfindlichkeit der Zähne und auf gereiztes Zahnfleisch während der Behandlung hin. Das Zahnfleisch, das mit dem Mittel in Berührung kommt, kann rot oder weiß werden, aber nimmt nach einigen Tagen wieder seine normale Farbe an.

- Empfehlen Sie ihrem Patienten, ein übermäßiges Füllen der Schiene zu vermeiden, überschüssiges Gel an der Grenze des Zahnfleisches wegzulassen und den Mund nach der Behandlung gründlich zu spülen, um Reizungen des weichen Gewebes zu verhindern.

- Weisen Sie den Patienten darauf hin, nach jeder Behandlung die Kappe wieder auf der Spritze der Spritze anzubringen.

- Der Patient darf mindestens 30 Minuten nach jeder Behandlung weder essen noch trinken oder rauchen.

- Weisen Sie den Patienten darauf hin, die Behandlung abbrechen und sich unverzüglich mit

ihnen in Verbindung zu setzen, wenn ein Problem **AUFBEWAHRUNGSEMPFEHLUNG** auftritt.

- Die endgültige Farbe ist etwa 2 Wochen nach der Behandlung zu sehen. Nach der Behandlung muss ein Folgetermin vereinbart werden.

WARNUNGEN

- Enthält Fluorid.
- Enthält Wasserstoffperoxid.
- Den Kontakt mit den Augen vermeiden.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nicht bei überempfindlichen Zähnen verwenden.
- Nicht essen, trinken oder rauchen, während sich die nach Maß angefertigten Schienen im Mund befinden.
- Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

ANWEISUNGEN ZUR ERSTEN HILFE

- Beim Verschlucken einer großen Menge (über 25 % des Gels in der Spritze), sofort Wasser trinken, kein Erbrechen herbeiführen und einen Arzt aufsuchen.
- Wenn Gel in die Augen gelangt, Augenlider nach oben ziehen, das Auge mindestens 15 Minuten ununterbrochen mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.
- Bei Kontakt mit Kleidung, Haut oder Haar, kontaminierte Kleidung entfernen und Haut und Aqua. Haar unter fließendem Wasser abspülen.

POTENZIELLE NEBENWIRKUNGEN

Nebenwirkungen, die mit dem Gebrauch von Cavex Bite&White zusammenhängen, sind unter anderem, aber nicht ausschließlich:

Manche Patienten empfinden während der Behandlung eine erhöhte Kälteempfindlichkeit der Zähne; bei anderen kommt es zu einer nicht-spezifischen Empfindlichkeit der Zähne, des Zahnfleisches, der Zunge, der Lippen oder des Rachens. Im Allgemeinen müssen die Symptome einige Tage nach Beendigung der Behandlung verschwinden. Die Behandlung kann mit kürzeren, weniger frequenten Anwendungen fortgesetzt werden, bis die gewünschte Bleichwirkung erreicht wurde. Wenn die Beschwerden andauern, muss die Behandlung beendet werden.

- Reizung des Zahnfleisches
- Schienen, die bis über das Zahnfleisch reichen, können eine mäßige bis ernsthafte Reizung des weichen Gewebes verursachen. Wenn die Schienen gut passen, überprüfen Sie bitte, ob der Patient die richtige Menge auf die richtige Weise anbringt. Eventuell muss die Menge des Gels in den Schienen verringert werden.

- Gekühlt (< 8° C) an einem dunklen und trockenen Ort aufbewahren.
- Das Produkt nach Verstreichen des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden.

ENTSORGUNG

- Entsorgen Sie das Produkt den lokalen Abfallvorschriften entsprechend.

SCHRITT C = KONDICIONOVÁNÍ: CAVEX BITE&WHITE EXSENSE

BESCHREIBUNG

Cavex Bite&White ExSense ist ein Gel auf Wasserbasis mit Minze-Aroma und enthält Hydroxyapatit und Kaliumnitrat. Cavex Bite&White ExSense verringert die Empfindlichkeit und verbessert das Bleichergebnis der Zähne durch die Remineralisierung von Hydroxyapatit.

VERPACKUNG

- Tuba 42 ml - 50 g (ausreichend für ca. 20 trinken, kein Erbrechen herbeiführen und einen Arzt aufsuchen.)

HAUPTBESTANDTEILE VON CAVEX BITE&WHITE EXSENSE:

Hydroxyapatit 2 %, Kaliumnitrat 0,1 %

ZUSAMMENSETZUNG

Hydriertes Stärkehydrolysat (Sorbitol), glycerin, erythritol, lithium magnesium natriumsilikat, hydroxyapatit, kaliumchlorid, Kaliumnitrat, fenoxylethanol, xanthangummi, Tetranatriumprofosfat, Weinsäure, Minze-Aroma, Natrium-Saccharin.

ANGABEN ZUR VERWENDUNG

- Nach dem Bleichen der Zähne im Büro oder zu Hause
- Nach einer professionellen Zahnreinigung
- Vermeidung und Verringerung der Empfindlichkeit

GEGENANZEIGEN

Verwenden Sie Cavex Bite&White ExSense nicht bei einer Allergie gegen Minze-Aroma oder einen beabsichtigten Verfahren und Zwecke.

ANWENDUNGSVERFAHREN

1. Zähne vorbereiten und reinigen durch Putzen und Verwendung von Zahnseide.
2. Použití:

Ohne Schiene:
Waschen Sie die Hände sorgfältig mit Wasser und Seife. Bringen Sie eine geringe Menge Cavex Bite&White ExSense auf einem sauberen Finger auf. Verteilen Sie das Gel vorsichtig über alle Flächen der oberen und unteren Zähne.
Lassen Sie das Gel 10 Minuten einwirken. Spucken

Sie eventuell überschüssiges Gel aus, aber spülen Sie den Mund nicht mit Wasser aus.

Mit Schiene:

Tragen Sie einen schmalen Streifen Cavex Bite&White ExSense auf Ihre Schiene auf. Bringen Sie Ihre Schiene ein und drehen Sie diese vorsichtig nach links und rechts, so dass das Gel gut über die Zähne verteilt wird. Beißen Sie anschließend vorsichtig auf die Schiene und lassen Sie das Gel 10 Minuten einwirken. Entfernen Sie die Schiene und spucken Sie eventuell überschüssiges Gel aus, aber spülen Sie den Mund nicht mit Wasser aus. Spülen Sie die Schiene mit kaltem Wasser ab.

1. Schrauben Sie den Verschluss nach dem Gebrauch immer sofort wieder auf die Tube.
4. Für optimale Ergebnisse mindestens 30 Minuten nach der Behandlung nicht essen oder trinken.
1. Verwenden Sie das Produkt 10 Tage lang täglich oder befolgen Sie die Anweisungen Ihres Zahnarztes.

WARNUNGEN UND ANWEISUNGEN ZUR ERSTEN HILFE

Bei Kontakt mit den Augen, gründlich spülen mit reichlich Wasser und einen Arzt aufsuchen. Das Produkt nach Verstreichen des

Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden.

AUFBEWAHRUNGSEMPFEHLUNG

An einem kühlen, trockenen (frosthfreien) Ort aufbewahren und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Hergestellt von Cavex Holland BV

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten Ware beschränkt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Master kit ABC Cavex Bite&White: Système de blanchiment à domicile ve 3 etapách

ÉTAPE A= ACTIVATION: CAVEX BITE&WHITE STAINLESS

POPIS

Activateur de blanchiment dentaire et pâte d'élimination des taches. Élimine les taches superficielles et la plaque dentaire. Posilnění blanitých vlastností díky zvýšení pH tekutiny.

CONDITIONNEMENT

Tuba 35 ml - 50 g

- Abrasif doux pour l'émail / la dentine.
- Haute valeur nettoyante et polissante.
- Augmente le pH de la bouche en guise de pré-traitement avant le blanchiment.
- N'est pas conçu pour un usage fréquent.

INGRÉDIENTS DE CAVEX BITE&WHITE STAINLESS

aqua, sorbitol, silice hydratée, glycérine, érythritol, silicate de lithium magnésium sodium, poloxamère, hexamétophosphate de sodium, gomme de cellulose, gomme xanthane, phénoxyéthanol, saccharine sodique, arôme de menthe, limonène, CI 42090

ÉTAPE B= BLANCHIMENT: CAVEX BITE&WHITE

POPIS

Le peroxyde d'hydrogène est l'agent de blanchiment de Cavex Bite&White. Il est ajouté sous forme de peroxyde de carbamide afin d'obtenir un produit suffisamment stable. Karbamidový peroxid se rozptyluje rapidement dans les radicaux d'oxygène et l'eau. Pendant le processus de blanchiment, les fibres radicaux attaquent les doubles liaisons de carbone, qui sont généralement à l'origine de la décoloration des dents.

CONDITIONNEMENT

- 3 sérka s obsahem 3 ml Cavex Bite&White

INGRÉDIENTS ACTIFS DE CAVEX BITE&WHITE

- 16% peroxydu karbamidu - ekvivalentní - Pro zabránění podráždění myších tkání,
- 6% peroxydu d'hydrogène
- 0,2% de nitrate de potassium désensibilisateur
- 0,1% de fluorure de sodium désensibilisateur

INGRÉDIENTS DE CAVEX BITE&WHITE

Peroxid karbamidu, dusičnan draselný, fluor sodný, karbopol, glycerin, EDTA, hydroxid draselný, mentolová esence, voda.

INDICATIONS D'UTILISATION

Cavex Bite&White est un gel de blanchiment dentaire permettant d'éclaircir la couleur des dents naturelles. Cavex Bite&White ne peut être distribué que sur ordonnance d'un professionnel dentaire. Il est recommandé de consulter un dentiste qualifié avant chaque traitement de blanchiment afin d'exclure tout problème buccal ou de santé.

CONTRE-INDICATIONS

Dans les cas suivants, il est recommandé de consulter un médecin:

- les femmes enceintes et femmes qui allaitent;

- les personnes qui suivent un traitement contre-Ne pas manger, boire ou fumer durant le port Cavex Bite&White une maladie grave;
- les enfants de moins de 18ans.

PROCÉDURE CLINIQUE

- Enregistrez la teinte initiale, évaluez la santé actuelle de la dentition et assurez-vous que les attentes du patient à l'égard du résultat final sont réalistes.
- Des restaurations provisoires ou temporaires des dents peuvent se décolorer durant le processus de blanchiment, tandis qu'un matériau composite ou polycarbonate ne sera pas influencé. C'est pourquoi les patients ayant subi des restaurations composites doivent être informés du fait que les composites existants devront peut-être être remplacés, étant donné que seules les dents naturelles s'éclaircissent.
- Chez les patients qui ont besoin d'une

restauration esthétique ou adhésive, attendez L'utilisation de Cavex Bite&White peut

- 2 semaines après le dernier traitement de blanchiment, aby se barva stabilizovala. Toutes les restaurations doivent être intactes ou correctement scellées avec les matériaux temporaires adéquats.
- Il y a lieu de recommander l'utilisation d'un dentifrice pour dents sensibles pendant 2 semaines avant et 2 semaines après le traitement.
- Vous devez toujours prévenir le patient de la possibilité d'effets indésirables qui peuvent être les suivants (tento seznam není úplný): arôme de menthe, saccharine de sodium.
- Sensibilité des dents
- Bêhem léčby mohou někteří pacienti - Après le blanchiment des dents au bureau et/ou à la maison
- Prévention et contrôle de la sensibilité
- CONTRE-INDICATIONS
- Ne pas utiliser Cavex Bite&White ExSense en cas de responsabilité. Si notre responsabilité devait néanmoins se trouver engagée, elle se limiterait, pour tous les dommages, à la valeur de la marchandise fournie par nous et mise en oeuvre par vos soins. Bien entendu, nous garantissons la qualité irréprochable de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente et de livraison.
- Procédure d'Utilisation
- Préparer et nettoyer les dents en les brossant et avec du fil dentaire.
- Utilisation:
- Lavez-vous les mains soigneusement avec de l'eau et du savon. Appliquez une petite quantité de Cavex Bite&White ExSense sur un doigt propre.
- Répartissez le gel doucement sur toutes les surfaces des dents du haut et du bas. Nechte gel působit 5 až 10 minut. Crachez tout excédent de gel et ne vous rincez pas la bouche à l'eau.

- 2 semaines avant et 2 semaines après le traitement.
- Vous devez toujours prévenir le patient de la possibilité d'effets indésirables qui peuvent être les suivants (tento seznam není úplný): arôme de menthe, saccharine de sodium.
- Sensibilité des dents
- Bêhem léčby mohou někteří pacienti - Après le blanchiment des dents au bureau et/ou à la maison
- Prévention et contrôle de la sensibilité
- CONTRE-INDICATIONS
- Ne pas utiliser Cavex Bite&White ExSense en cas de responsabilité. Si notre responsabilité devait néanmoins se trouver engagée, elle se limiterait, pour tous les dommages, à la valeur de la marchandise fournie par nous et mise en oeuvre par vos soins. Bien entendu, nous garantissons la qualité irréprochable de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente et de livraison.
- Procédure d'Utilisation
- Préparer et nettoyer les dents en les brossant et avec du fil dentaire.
- Utilisation:
- Lavez-vous les mains soigneusement avec de l'eau et du savon. Appliquez une petite quantité de Cavex Bite&White ExSense sur un doigt propre.
- Répartissez le gel doucement sur toutes les surfaces des dents du haut et du bas. Nechte gel působit 5 až 10 minut. Crachez tout excédent de gel et ne vous rincez pas la bouche à l'eau.

- Demandez au patient de stopper le traitement et de vous contacter immédiatement en cas de problème.
- La couleur finale se matérialise au bout d'environ 2 semaines à compter du début du traitement. Après le traitement, un rendez-vous de suivi doit être fixé.

AVERTISSEMENTS

- Contient du fluor.
- Contient du peroxyde d'hydrogène.
- Éviter le contact avec les yeux.
- Garder hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser sur des dents hypersensibles.
- Les personnes qui mangent, boivent ou fument durant le port Cavex Bite&White des gouttières produites sur mesure.
- Nocif en cas d'ingestion.

INSTRUKCE PRO PRVNÍ ZAJIŠTĚNÍ

- Lorsq'une grande quantité de gel (plus de 25% du gel contenu dans la seringue) a été avalée: boire immédiatement de l'eau, ne pas provoquer de vomissements et consulter un médecin.
- V případě kontaktu gelu s očima: opláchněte oči vodou po dobu nejméně 15 minut bez přerušení a očistěte od něj zorničky a poradte se s lékařem.
- V případě kontaktu s oděvem, pokožkou nebo línými kostmi: sundejte oděv a důkladně opláchněte pokožku nebo líní kosti vodou.

MOŽNÉ INDÉSIRABLES EFFETS

s'accompagner d'effets indésirables qui peuvent être les suivants (tento seznam není úplný): arôme de menthe, saccharine de sodium.

INGRÉDIENTS ACTIFS DE CAVEX BITE&WHITE

- 16% peroxydu karbamidu - ekvivalentní - Pro zabránění podráždění myších tkání,
- 6% peroxydu d'hydrogène
- 0,2% de nitrate de potassium désensibilisateur
- 0,1% de fluorure de sodium désensibilisateur

- 2 semaines avant et 2 semaines après le traitement.
- Vous devez toujours prévenir le patient de la possibilité d'effets indésirables qui peuvent être les suivants (tento seznam není úplný): arôme de menthe, saccharine de sodium.
- Sensibilité des dents
- Bêhem léčby mohou někteří pacienti - Après le blanchiment des dents au bureau et/ou à la maison
- Prévention et contrôle de la sensibilité
- CONTRE-INDICATIONS
- Ne pas utiliser Cavex Bite&White ExSense en cas de responsabilité. Si notre responsabilité devait néanmoins se trouver engagée, elle se limiterait, pour tous les dommages, à la valeur de la marchandise fournie par nous et mise en oeuvre par vos soins. Bien entendu, nous garantissons la qualité irréprochable de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente et de livraison.
- Procédure d'Utilisation
- Préparer et nettoyer les dents en les brossant et avec du fil dentaire.
- Utilisation:
- Lavez-vous les mains soigneusement avec de l'eau et du savon. Appliquez une petite quantité de Cavex Bite&White ExSense sur un doigt propre.
- Répartissez le gel doucement sur toutes les surfaces des dents du haut et du bas. Nechte gel působit 5 až 10 minut. Crachez tout excédent de gel et ne vous rincez pas la bouche à l'eau.

KONZERVATIVNÍ KONZERVACE

- Uchovávejte v chladném prostředí (< 8 °C) v chladném a bezpečném prostředí.
- Ne pas utiliser le produit au-delà de la date limite d'utilisation.

ÉLIMINATION

- Éliminer le produit conformément aux règles locales en matière de déchets.

ÉTAPE C = CONDITIONNEUR: CAVEX BITE&WHITE EXSENSE

POPIS

ExSense est un gel à base d'eau au goût de menthe et contenant de l'hydroxyapatite et du salpêtre. Cavex Bite&White ExSense réduit la sensibilité et rend les dents plus blanches par reminéralizace hydroxyapatitu.

CONDITIONNEMENT

Tuba o objemu 42 ml - 50 gramů (vystačí na cca 20 ošetření)

PRINCIPÁLNÍ INGÉDIENTS DE CAVEX BITE&WHITE EXSENSE:

hydroxyapatit 2%, salpêtre 0,1%

SLOŽENÍ

aqua, hydrolysat d'amidon hydrogéné (sorbitol), glycérine, érythritol, silicate de lithium magnésium sodium, hydroxyapatite, chlorure de potassium, nitrate de potassium, phénoxyéthanol, gomme xanthane, pyrophosphate tétrasodique, acide tartrique, arôme de menthe, saccharine de sodium.

INDICATIONS D'UTILISATION

- Bêhem léčby mohou někteří pacienti - Après le blanchiment des dents au bureau et/ou à la maison
- Prévention et contrôle de la sensibilité

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser Cavex Bite&White ExSense en cas de responsabilité. Si notre responsabilité devait néanmoins se trouver engagée, elle se limiterait, pour tous les dommages, à la valeur de la marchandise fournie par nous et mise en oeuvre par vos soins. Bien entendu, nous garantissons la qualité irréprochable de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente et de livraison.

PROCÉDURE D'UTILISATION

1. Préparer et nettoyer les dents en les brossant et avec du fil dentaire.
 2. Utilisation:
- Sans gouttière:
- Lavez-vous les mains soigneusement avec de l'eau et du savon. Appliquez une petite quantité de Cavex Bite&White ExSense sur un doigt propre.
- Répartissez le gel doucement sur toutes les surfaces des dents du haut et du bas. Nechte gel působit 5 až 10 minut. Crachez tout excédent de gel et ne vous rincez pas la bouche à l'eau.

Avec gouttière:

Appliquez jennou vrstvu Cavex Bite/White ExSense na celou délku dna. Insérez la gouttière dans la bouche et tournez-la doucement de gauche à droite pour bien répartir le gel sur les dents. Mordez ensuite lentement sur la gouttière et laissez agir le gel pendant 5 à 10 minutes. Vyndejte dnu, vymačkejte veškerý přebytečný gel a ne vous rincez pas la bouche à l'eau. Rincez la gouttière à l'eau froide.

1. Après utilisation, remettez directement le bouchon en place sur le tube.
4. Pour des résultats optimaux: s'abstenir de

manger et boire pendant au moins 30minutes après le traitement.

5. Utilisez le produit tous les jours pendant 10jours, ou suivez les instructions de votre conseiller dentaire.

AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS DE PREMIERS SECOURS

V případě kontaktu s očima: opláchněte je vodou a požádejte o lékařskou pomoc. Ne pas utiliser le produit au-delà de la date limite d'utilisation.

CONSEILS DE CONSERVATION

Uchovávejte na bezpečném a čistém místě (v blízkosti gelu) a v blízkosti přímých paprsků slunce.

Fabriqué par Cavex Holland BV

Les conseils que nous vous donnons verbalement ou par écrit dans le cadre de notre assistance technique et de nos essais n'engagent pas notre responsabilité - même en ce qui concerne d'éventuels droits de tiers en matière de propriété industrielle - et ne vous dispensent pas de la nécessité de vérifier par des essais pratiques si nos produits conviennent aux applications que vous envisagez.

L'utilisation, la mise en oeuvre et la transformation des produits fournis échappent à notre contrôle et relèvent, dès lors, exclusivement de votre

responsabilité. Si notre responsabilité devait néanmoins se trouver engagée, elle se limiterait, pour tous les dommages, à la valeur de la marchandise fournie par nous et mise en oeuvre par vos soins. Bien entendu, nous garantissons la qualité irréprochable de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente et de livraison.

Cavex Bite&White ABC Master Kit :
3krokový systém domácího bělení

KROK A= AKTIVACE:

CAVEX BITE&WHITE STAINLESS

POPIS

Bělící aktivátor zubů a pasta na odstraňování skvrn. Odstraňuje povrchové skvrny a zubní plak

ze zubů. Zlepšuje bělení tím, že

optimalizuje pH v ústech.

- Mírně abrazivní pro sklovinu / dentin
- Vysoké hodnoty čištění a leštění.
- Zvyšuje pH v ústech jako přípravek pro bělení zubů.
- Není určeno k běžnému používání.

BALENÍ

Tuba 35 ml - 50 g

CAVEX BITE&WHITE NEREZOVÉ PŘÍŠADY

Voda, sorbitol, hydratovaný oxid křemičitý, glycerin, erytritol, křemičitan hořečnatý sodný, polykamer, hexametafosforečnan sodný, celulózová guma, xanthanová guma, fenoxethanol, sacharin sodný, aroma máty, limonen, CI 42090.

STEP B= BRIGHTEN: CAVEX BITE&WHITE

POPIS

Peroxid vodíku je bělící činidlo v přípravku Cavex Bite&White. Přidává se ve formě karbamidperoxidu, aby byl produkt dostatečně stabilní. Karbamidperoxid se rychle rozkládá na kyslíkové radikály a vodu. Během

při bělení volné radikály napadají

dvoujné uhlikové vazby, které jsou zdrojem většiny barev (skvrn) na zubech.

BALENÍ

- Cavex Bite&White 3 ml injekční stříkačky

CAVEX BITE&WHITE AKTIVNÍ SLOŽKY

- 16 % karbamidperoxid - ekvivalent 6 % peroxidu vodíku
- 0,2 % Desenzibilizátor dusičnan draselný
- 0,1 % Desenzibilizátor fluoridu sodného

SLOŽENÍ

Karbamidperoxid, dusičnan draselný, fluorid sodný, karbomer, glycerin, EDTA, hydroxid draselný, mátový olej, voda.

INDIKACE K POUŽITÍ

Cavex Bite&White je bělící gel pro zesvětlení přirozené barvy zubů.
zuby. Přípravek Cavex Bite&White by měl být pouze vydáván zubním lékařem nebo na jeho příkaz profesionální. Před jakoukoli bělící procedurou je třeba konzultovat s kvalifikovaným zubním lékařem.

doporučeno, abyste se ujistili, že nemáte žádné základní ústní nebo zdravotní problémy.

KONTRAINDIKACE

Doporučuje se poradit se s lékařem v případě.

- z:
- Těhotné a kojící ženy
 - Osoby, které se v současné době léčí se závažným onemocněním
 - Děti mladší 18 let

KLINICKÝ POSTUP

- Zaznamenejte počáteční odstín, zkontrolujte aktuální stav chrupu a ujistěte se, že pacient má realistická očekávání ohledně konečných výsledků.

- Provizorní nebo dočasné náhrady mohou během procesu bělení změnit barvu, zatímco kompozitní nebo polykarbonátové materiály zůstanou nedotčeny. Proto je třeba pacienty s kompozitními výplněmi upozornit, že stávající kompozity mohou vyžadovat výměnu, protože bělit lze pouze přírodní zuby.
- U pacientů, kteří vyžadují estetické nebo adhezivní výplně, vyčkejte 2 týdny po posledním bělení, aby se barva stabilizovala. Všechny výplně by měly být narušené nebo dobře utěsněné vhodnými dočasnými materiály.

- Doporučuje se používat zubní pastu pro zmiřnění citlivosti od 2 týdnů před až do 2 týdnů po ošetření.

- Pacienti by neměli být vždy upozorněni na citlivost zubů nebo podráždění dásní během ošetření. Dásně, které se dostanou do kontaktu, mohou zčervenat nebo zbledat, ale po několika dnech se vrátí do normální barvy.

- Abyste předišli podráždění měkkých tkání, doporučuje se zabránit přeplnění zásobníků, setřít přebytečný gel z linie dásní a po ošetření důkladně vypláchnout ústa.

- Po každém ošetření se ujistěte, že pacient vymění uzávěr injekční stříkačky.

- Pacient by neměl jíst, pít ani kouřit tabák po dobu nejméně 30 minut po každém ošetření.

- Poučte pacienta, aby léčbu přerušil a v případě výskytu jakýchkoli problémů vás okamžitě kontaktoval.

- Konečného odstínu dosáhnete přibližně 2 týdny po zahájení ošetření.
Po ošetření by měla být domluvena kontrolní schůzka.

UPOZORNĚNÍ

- Obsahuje fluorid.
- Obsahuje peroxid vodíku.
- Vyhnete se kontaktu s očima.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

- Vyhnete se expozici známých přecitlivělých zubů.
- Během nošení naplněných, na míru upravených zásobníků, nepijte a nekoufe.

- Při požití škodlivý.

POKYNY PRO PRVNÍ POMOČ

- Pokud je v přípravku velké množství (více než 25 % gelu v injekční stříkačce) okamžitě vypijte vodu. Chlorid draselný, dusičnan draselný, nevyvolávejte zvracení a kontaktujte lékaře.
- Pokud se gel dostane do očí, podržte víčka od sebe a nepřetržitě vyplachujte oko tekoucí vodou po dobu nejméně 15 minut a kontaktujte lékaře.
- Dojde-li ke kontaktu s oděvem, kůží nebo vlasy, odstraňte je **INDIKACE K POUŽITÍ**
kontaminovaný oděv a opláchněte pokožku nebo vlasy tekoucí vodou.

MOŽNÉ NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY

Nežádoucí účinky, které mohou být spojeny s používáním přípravku Cavex Bite&White, zahrnují mimo jiné: citlivost

U některých pacientů může dojít ke zvýšenému výskytu zubů

citlivost na chlad během ošetření, zatímco ostatní mohou mít nespecifickou citlivost zubů, dásní, jazyka, rtů nebo krku. Obecně by příznaky měly vymizet během několika dnů po ukončení léčby. V ošetření lze pokračovat kratšími a méně častými aplikacemi, dokud není dosaženo požadovaného bělicího účinku. Pokud nepřijemné pocity přetrvávají, přerušete léčbu.
Podráždění dásní Zásobníky, které zasahují do dásní, mohou způsobit mírné až silné podráždění měkkých tkání. Pokud zásobníky správně sedí, zkontrolujte, zda pacient aplikuje správné množství správným způsobem. Možná bude třeba, aby pacient snížil množství gelu ve svých zásobnicích.

RADY PRO SKLADOVÁNÍ

pacientovi - Uchovávejte v chladu (<8°C) na tmavém a

- Nepoužívejte materiál po doby použitelnosti.

DISPOZICE

- Zařízení zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.

KROK C= PODMÍNKA:

CAVEX BITE&WHITE EXSENSE

POPIS

Cavex Bite&White ExSense je gel na vodní bázi s vůní máty, který obsahuje hydroxyapatit a dusičnan draselný.
Cavex Bite&White ExSense snižuje citlivost a zvyšuje bělost zubů pomocí hydroxyapatitové remineralizace.

BALENÍ

Tuba 42 ml - 50 g (vystačí přibližně na 20 ošetření)

CAVEX BITE&WHITE EXSENSE KLÍČOVÉ SLOŽKY: Chraňte před přímým slunečním zářením.
Hydroxyapatit 2%, dusičnan draselný 0,1%

SLOŽENÍ

Voda, hydrolyzát hydrogenovaného škrobu (sorbitol), glycerin, erytritol, křemičitan hořečnatý sodný, hydroxyapatit,

Fenoxethanol, xantánová guma, pyrofosforečnan tetrasodný, kyselina vinná, mátový aroma, sacharin sodný.

odstraňte je **INDIKACE K**

- Po bělení zubů v ordinaci a/nebo doma
- Po profesionálním čištění zubů
- Prevence a kontrola citlivosti

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte Cavex Bite&White ExSense v případě alergie na mátový aroma nebo na některou ze složek.

MANIPULAČNÍ POSTUP

1. Připravte si a vyčistěte zuby pomocí zubního kartáčku a zubní nitě.
2. Použití:

Bez zásobníku:

Důkladně si umyjte ruce vodou a mýdlem. Na čistý prst naneste malé množství přípravku Cavex Bite&White ExSense. Jemně naneste gel na všechny plochy horních a dolních zubů. Nechte gel na zuby působit 10 minut. Přebytečný gel vyplivněte a nevyplachujte ústa vodou.

Se zásobníkem:

Dávkujte malý proužek přípravku Cavex Bite&White ExSense po celé ploše zásobníku. Vložte zásobník a

jemně otáčejte zásobníkem doleva a doprava, abyste se ujistili, že gel je

rozdělen po zubech. Jemně se do zásobníku zakousnete a nechte gel působit 10 minut. Vyjměte zásobník, vyplivněte přebytečný gel a nevyplachujte ústa vodou. Vypláchněte zásobník studenou vodou.

3. Po použití tuby vždy ihned uzavřete uzávěrem.
4. Pro dosažení nejlepších výsledků nepijte a nejezte alespoň 30 minut po aplikaci.
5. Přípravek použijte každý den po dobu 10 dnů nebo podle pokynů zubního lékaře.

VAROVÁNÍ A POKYNY PRO PRVNÍ POMOČ

Při zasažení očí je důkladně vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Nepoužívejte materiál po doby použitelnosti.

RADY PRO SKLADOVÁNÍ

Skladujte na chladném a suchém místě (bez mrazu) a

Chrňte před přímým slunečním zářením.
Vyrobeno společností Cavex Holland BV

Naše technické poradenství, ať už ústní, písemné nebo formou zkoušek, je poskytováno v dobré víře, ale bez záruky, což platí i v případě, že se jedná o vlastnická práva třetích stran. To

vás nezbujuje povinností testovat námi dodaných výrobků, pokud jde o jejich vhodnost pro zamýšlené procesy a použití. Aplikace, použití a zpracování produktů jsou mimo naši kontrolu a,

proto nesete výhradně vlastní odpovědnost.

Pokud by i přes tuto skutečnost vznikla odpovědnost za škodu, bude omezena na hodnotu námi dodaného a vámi použitého zboží. Samozřejmě se zavazujeme zajistit stáloú kvalitu našich výrobků v rozsahu našich Všeobecných prodejních a dodacích podmínek.

Cavex Bite&White ABC-Masterkit: Sistema di sbiancamento dentale domiciliare in 3 fasi

FASE A= ATTIVAZIONE:

CAVEX BITE&WHITE STAINLESS

DESCRIZIONE

Attivatore per lo sbiancante e pasta per la rimozione delle macchie. Rimuove le macchie superficiali e la placca dai denti. Potenza i trattamenti di sbiancamento, ottimizzando il pH Si consiglia di rivolgersi a un medico nei seguenti casi:
 - Leggermente abrasivo per lo smalto/la dentina.
 - Grande pulizia e lucidatura.
 - Aumenta il pH nella bocca come pretrattamento per lo sbiancamento.
 - Non adatto per un uso frequente.

CONFEZIONE

Tubetto da 35ml - 50g

COMPONENTI DI CAVEX BITE&WHITE STAINLESS:

acqua, sorbitolo, silice idratata, glicerina, eritritolo, litio magnesio silicato di sodio, poloxamer, sodio esametfosfato, gomma di cellulosa, gomma di xantano, fenossietanolo, saccarina sodica, aroma di menta, limonene, Cl 42090

FAZE B = SBIANCAMENTO: CAVEX BITE & WHITE

DESCRIZIONE

L'acqua ossigenata contenuta in Cavex

Bite&White agisce come agente sbiancante. Viene aggiunta come perossido di carbamide, per ottenere un prodotto sufficientemente stabile. Il perossido di carbamide si scioglie rapidamente nei radicali dell'ossigeno e nell'acqua. Durante il processo di sbiancamento, i radicali liberi attaccano i legami doppi di carbonio, che, solitamente, sono la causa delle macchie dei denti.

CONFEZIONE

- 3 siringhe di Cavex Bite&White da 3 ml

KOMPONENTY CAVEX BITE&WHITE

- 16% perossido di carbamide- pari al 6% di acqua ossigenata
 - 0,2% di nitrato di potassio - desensibilizzante
 - 0,1 % fluoruro sodného - desensibilizzante

KOMPONENTY CAVEX BITE&WHITE

Perossido di carbamide, nitrato di potassio, fluor di sodio, carbomero, glicerina, EDTA (acido etilendiamminotetraacetico), idrossido di potassio, olio di menta piperita, acqua.

INDICAZIONI PER L'USO

Cavex Bite&White è un gel per sbiancare il colore dei denti naturali. Cavex Bite&White dovrebbe essere fornito unicamente su richiesta di un dentista. Per escludere eventuali problemi di salute generale o del cavo orale, si consiglia di richiedere un consulto presso un dentista qualificato prima dello sbiancamento.

CONTROINDICAZIONI

consiglia di rivolgersi a un medico nei seguenti casi:
 - donne in stato di gravidanza e durante l'allattamento;
 - persone sottoposte a terapia medica per una malattia grave;
 - minori di 18 anni.

PROCEDURA CLINICA

- Determinare il colore di partenza, valutare la salute attuale dei denti e assicurarsi che le aspettative del cliente relativamente al risultato finale siano realistiche.
 - Restauri provvisori o temporanei possono scolorire durante lo sbiancamento, mentre il materiale composito o il policarbonato non subiscono alcun cambiamento. Per tale motivo, ai pazienti con restauri in materiali compositi si deve fare presente che tali compositi potrebbero richiedere la sostituzione in quanto solo i denti naturali si sbiancheranno.

- Nel caso di pazienti che necessitano di un restauro cosmetico o adesivo, attendere 2 settimane prima dell'ultimo trattamento, per dare modo al colore di stabilizzarsi. Tutti i restauri devono essere intatti o ben sigillati con i giusti materiali provvisori.
 - Si deve consigliare l'uso di un dentifricio per denti sensibili, da due settimane prima del trattamento fino a 2 settimane dopo il trattamento.
 - Si deve sempre avvertire il paziente che, durante il trattamento, si potranno avvertire sensibilità dei denti o irritazione delle gengive. La gengiva che viene a contatto con il gel può diventare rossa o bianca, ma dopo qualche giorno ritorna al colore normale.
 - Per prevenire un'irritazione dei tessuti molli, consigliare al paziente di non mettere troppo gel nella mascherina, di togliere il gel in eccesso lungo il bordo della gengiva e di sciacquare bene la bocca dopo il trattamento.
 - Fare presente al paziente che dopo ogni trattamento si deve di nuovo collocare il tappo sulla siringa.
 - Il paziente non dovrebbe bere, mangiare o fumare per almeno 30 minuti dopo ogni trattamento.

- In caso di problemi, il cliente deve interrompere il trattamento e contattare immediatamente il dentista.
 - La tonalità di colore sarà raggiunta circa 2 settimane dopo l'inizio del trattamento. Dopo il trattamento dovrà essere pianificata una visita di controllo.

AVVERTENZE

- Obsahuje fluor.
 - Contiene acqua ossigenata.
 - Vyvarujte se kontaktu s očima.
 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 - Non usare in caso di denti ipersensibili.
 - Quando si fa uso delle mascherine, non bere, e non mangiare o fumare.
 - Noci se ingeruji.

ISTRUZIONI DI PRONTO SOCCORSO

- V případě požití velkého množství gelu (più del 25% del gel della siringa): ihned užijte vodu, nezpůsobujte zvracení a poraďte se s lékařem.
 - Se il gel viene a contatto con gli occhi: aprire le palpebre, sciacquare l'occhio per almeno 15 minuti consecutivi e consultare un medico.
 - In caso di contatto con abiti, cute o capelli, togliere gli abiti contaminati e sciacquare la pelle e i capelli con molta acqua.

POSSIBILI REAZIONI AVVERSE

Qui di seguito illustriamo alcune delle reazioni avverse che possono dipendere dall'uso di Cavex Bite&White.

- Sensibilità
 Durante il trattamento alcuni pazienti possono manifestare una maggiore sensibilità dei denti al freddo, altri possono manifestare una sensibilità non specifica dei denti, delle gengive, della lingua, delle labbra o della gola.
 In generale, i sintomi dovrebbero scomparire entro pochi giorni dopo la fine del trattamento. Il trattamento può continuare con applicazioni più brevi e meno frequenti fino a ottenere l'effetto desiderato. Se il fastidio persiste, interrompere il trattamento.
 - Dráždivost ženšin
 Le mascherine che arrivano fino alla gengiva possono provocare da lieve a severa irritazione del tessuto molle. Se le mascherine si adattano con precisione, controllare se il paziente applica il gel nella giusta quantità e in modo corretto. Forse il paziente dovrebbe ridurre la quantità di gel nella mascherina.

CONSERVAZIONE

- Uchovávejte na chřstvěm místě (<8 °C), v buio e asciutto.
 - Non usare il prodotto dopo la data di

scadenza.

SMALTIMENTO

- Smaltire il prodotto conformemente alle regolamentazioni locali sui rifiuti.

FAZE C = CONDIZIONAMENTO: CAVEX BITE&WHITE EXSENSE

DESCRIZIONE

Cavex Bite&White ExSense è un gel a base d'acqua con sapore di menta, che contiene idrossiapatite e nitrato di potassio. Cavex Bite&White ExSense snižuje citlivost i denti più bianchi grazie alla rimineralizzazione di idrossiapatite.

CONFEZIONE

Tubetto da 42 ml - 50 grammi (dostatečné procca 20 trattamenti)

COMPONENTI PRINCIPALI DI CAVEX BITE&WHITE EXSENSE:

idrossiapatite 2%, nitrato di potassio 0,1%

COMPOSIZIONE:

acqua, idrolisato di amido idrogenato (sorbitolo), glicerina, eritritolo, litio magnesio silicato di sodio, idrossiapatite, cloruro di potassio, nitrato di potassio, fenossietanolo, gomma di xantano, tetrasodio pirofosfato, acido tartarico, aroma di menta, saccarina sodica.

INDICAZIONI PER L'USO

- Dopo lo sbiancamento dei denti nell'ambulatorio per iscritto o in maniera dimostrativa e dentistico e/o a domicilio.
 - Dopo la pulizia professionale dei denti
 - Prevenire e ridurre la sensibilità

CONTROINDICAZIONI

Nepoužívejte Cavex Bite&White ExSense v případě alergie na mentu nebo na některou z jejích složek.

PROCEDURA PER L'USO

1. Preparare e pulire i denti con spazzolino e filo interdentale.
 2. Aplikace:

Senza mascherina:
 Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone. Aplikujte malé množství přípravku Cavex Bite&White ExSense na čisté místo. Stendere il gel delicatamente su tutte le superfici dei denti superiori e inferiori. Nechejte gel působit 10 minut.
 Sputare l'eventuale gel in eccesso e non sciacquare la bocca con acqua.

Con mascherina:

Aplikujte na celou délku řasenku Cavex Bite&White ExSense. Pozicionare la mascherina e ruotarla lentamente verso sinistra e destra in modo che il gel sia ben distribuito sopra i denti. Mordere delicatamente la mascherina e lasciare agire il gel per 10 minuti.

Togliere la mascherina, sputare l'eventuale

gel in eccesso e non sciacquare la bocca con acqua. Sciacquare la mascherina con acqua fredda.

- 1 Chiedere sempre il tubo con il tappo inhed po použití.
- 4 Per i migliori risultati, non mangiare né bere per almeno 30 minuti dopo il trattamento.
- 5 Utilizzare il prodotto ogni giorno per 10 giorni, o come indicato dal vostro dentista.

AVVERTENZE E ISTRUZIONI DI PRIMO SOCCORSO

In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non usare il prodotto dopo la data di scadenza.

CONSERVAZIONE

Uchovávejte v chřstvěm a suchém prostředí ne v horkém), v dosahu přímého světla mořského dna (al riparo dalla luce diretta del sole).

Výrobek společnosti Cavex Holland BV

La nostra consulenza tecnica, svolta a voce,

rilasciata in buona fede e senza alcuna garanzia anche per quanto concerne eventuali diritti di proprietà industriali di terzi. Questa non esime il cliente da eseguire controlli dei prodotti forniti allo scopo di stimare l'idoneità ai procedimenti ed ai fini previsti. L'applicazione, l'impiego e la trasformazione dei prodotti hanno luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricadono pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Nel caso tuttavia che si esiga una responsabilità, questa sarà limitata, per tutti i danni, al valore dei prodotti da noi forniti ed impiegati dal cliente. Ovviamente noi garantiamo la qualità dei nostri prodotti in conformità alle nostre condizioni generali di vendita e di consegna.

Cavex Bite&White ABC Master Kit : Sistema de blanqueamiento en casa en 3 pasos

PASO A= ACTIVACIÓN: CAVEX BITE&WHITE STAINLESS

DESCRIPCIÓN
 Activador de blanqueamiento dental y pasta para la eliminación de manchas. Elimina manchas superficiales y placa de los dientes. Mejora los tratamientos de blanqueamiento optimando el pH en la boca.

PRESENTACIÓN

Tubo de 35 ml - 50 g
 - Ligeramente abrasivo para el esmalte / dentina.
 - Altos índices de limpieza y pulido.
 - Aumenta el valor de pH como pretratamiento para el blanqueamiento dental.
 - No es apto para uso frecuente.

INGREDIENTES DE CAVEX BITE&WHITE STAINLESS

Aqua, sorbitol, sílice hidratada, glicerina, eritritol, silicato de litio magnesio sodio, poloxamer, hexametfosfato de sodio, goma de celulosa, goma de xantano, fenoxietanol, sacarina de sodio, aroma de menta, limoneno, CI 42090

PASO B = BLANQUEAMIENTO: CAVEX BITE&WHITE

DESCRIPCIÓN
 Peróxido de hidrógeno es el agente blanqueador en Cavex Bite&White. Es añadido como un peróxido de carbamida para asegurar suficiente estabilidad del producto. El peróxido de carbamida se rápidamente disuelve en radicales de oxígeno y agua. Durante el proceso de blanqueamiento, los radicales libres atacan los compuestos de carbono de enlace doble que generalmente for el origen de la decoloración dental (manchas).

PRESENTACIÓN

- Jeringas de 3 ml Cavex Bite&White

INGREDIENTES ACTIVOS DE CAVEX BITE&WHITE

- 16 % peróxido de carbamida - odpovídá 6 % peróxido de oxígeno.
 - 0,2% desensibilizante de nitrato de potasio
 - 0,1% desensibilizante de fluoruro de sodio

COMPOSICIÓN

Peróxido de carbamida, nitrato de potasio, sodný fluor, karbómero, glicerín, EDTA, hydroxido de potasio, aceite de menta, agua.

INDICACIONES DE USOSO

Cavex Bite&White es un gel de blanqueamiento dental que aclara el color de dientes naturales. Cavex Bite&White solo puede ser dispensado por un profesional dental. Para evitar problemas de la boca o de la salud, se recomienda una consulta inicial con un dentista cualificado antes de realizar - El color final se materializará a cualquier procedimiento de blanqueamiento.

KONTRAINDIKACE

Se recomienda consultar a un médico en caso de:
 - Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia
 - Personas que están recibiendo tratamiento para una enfermedad grave
 - Niños menores de 18 años

PROCEDIMIENTO CLÍNICO

- Registre el color inicial, evalúe la salud actual de los dientes y asegúrese de las expectativas del paciente respecto al resultado final sean realistas.
 - Restauraciones provisionales o temporales pueden decolorar durante el proceso de blanqueamiento, mientras que los materiales compuestos o de policarbonato no se verán afectados. Por este motivo, los pacientes con restauraciones con composite deben ser informados de que posiblemente se deberán de reemplazar los composites existentes, puesto que solo los dientes naturales se pondrán más blancos.

- Los pacientes que requieren restauraciones estéticas o adhesivas deberían esperar 2 semanas después del último tratamiento de blanqueamiento para permitir la estabilización del barva. Todas las restauraciones deben estar intactas nebo correctamente selladas con los materiales temporales adecuados.
 - Se recomienda el uso de pasta dentífrica para dientes sensibles, durante un periodo de 2 semanas antes del tratamiento y 2 semanas después del tratamiento.
 - Los pacientes siempre deben ser informados sobre la posibilidad de sensibilidad dental o encías irritadas durante el tratamiento. Las áreas gingivales que entran en contacto pueden volverse rojas o blancas pero después de unos días recuperarán su color normal.
 - Para evitar irritaciones del tejido blando, debe aconsejar al paciente de no llenar excesivamente las cubetas, quitar el gel superfluo en el borde de la encía y enjuagar la boca cuidadosamente después de cada

tratamiento.
 - Indique al paciente que después de cada tratamiento debe colocar el tapón en la jeringa.
 - El paciente no debe comer, beber ni fumar

tabaco al menos 30 minutos después de cada **PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO** tratamiento.

- Indique al paciente que interrumpa el tratamiento y se ponga inmediatamente en contacto con usted si se produce un problema.
 - El color final se materializará a aproximadamente 2 semanas después del inicio del tratamiento. Después del tratamiento debe planificarse una consulta de seguimiento.

REKLAMY

- Obsahuje fluor.
 - Obsahuje peróxido de hidrógeno.
 - Vyvaruje se kontaktu s očními bulvami.
 - Mantenga fuera del alcance de los niños.
 - Evite la exposición de dientes hipersensibles conocidos.
 - No coma, beba ni fume mientras lleve las cubetas predefinidas hechas a la medida.
 - Nocivo por ingestión.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Si ingiere una gran cantidad del producto (más del 25% del gel en la jeringa), debe beber inmediatamente agua, no induzca el vómito y consulte a un médico.
 - Pokud se gel dostane do kontaktu s očními víčky, párpados, nepřetržitě aplikujte na oční víčka rourovitou vodu po dobu 15 minut a obraťte se na lékaře.
 - Si el producto entra en contacto con la ropa, la piel y el pelo, quítese la ropa contaminada y magnesio sodio, hidroxiapatita, cloruro de potasio, nitrato de potasio, phenoxyethanol, goma xantana, pirofosfato tetrasódico ácido tartárico, aroma de menta, sacarina de sodio.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Mezi sekundární účinky, které mohou vzniknout při používání přípravku Cavex Bite&White, patří, ale neomezují se pouze na tyto:
 - Sensibilidad
 Algunos pacientes pueden experimentar mayor sensibilidad o frialdad en los dientes, mientras que otros pueden experimentar una sensibilidad no específica en los dientes, encías, lengua, labios o garganta. En general, los síntomas suelen desaparecer unos días después del fin del tratamiento. El tratamiento puede continuarse con aplicaciones más cortas y menos frecuentes hasta que se logre el efecto de blanqueamiento deseado. Si el malestar persiste, suspenda el tratamiento.
 - Irritación gingival
 Las cubetas que se extienden hasta las encías pueden causar una irritación moderada a grave del tejido blando. Si las cubetas se ajustan Ponga un poco de Cavex Bite&White ExSense en correctamente, compruebe si el paciente aplica un dedo limpio. Aplique el gel suavemente sobre la cantidad adecuada en la forma adecuada. Puede ser que el paciente tenga que reducir la cantidad de gel en las cubetas.

- Uchovávejte v chladničce (<8 °C) na tmavém a chladném místě.
 - No utilizar el material una vez transcurrida su fecha de caducidad.

ELIMINACIÓN

- Elimine el producto de conformidad con las regulaciones locales de eliminación de residuos.

PASO C = ACONDICIONAMIENTO: CAVEX BITE&WHITE EXSENSE

DESCRIPCIÓN

Cavex Bite&White ExSense es un gel a base de agua con aroma de menta que contiene hidroxiapatita y nitrato de potasio. Cavex Bite&White ExSense controla la sensibilidad y mejora la blancura de los dientes por remineralización de hidroxiapatita.

PRESENTACIÓN

Tubo de 42 ml - 50 gramos (suficiente para aproximadamente 20 tratamientos)

INGREDIENTES CLAVE DE CAVEX BITE&WHITE EXSENSE:

Hidroxiapatita 2%, nitrato de potasio 0,1%

COMPOSICIÓN

Aqua, hidrolizado de almidón hidrogenado (sorbitol), glicerina, eritritol, silicato de litio

INDICACIONES DE USOSO

- Después del blanqueamiento dental en el consultorio y/o en casa
 - Después de una limpieza dental profesional
 - Prevención y control de la sensibilidad

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte Cavex Bite&White ExSense en caso de alergia aroma de menta o a cualquiera de los excipientes.

PROCEDIMIENTO DE USO

1. Připravte a vyčistěte zuby pomocí cepínu a zubního hřebenu.
 2. Aplikace:

Sin cubeta:
 Lávese las manos a fondo con agua y jabón. Ponga un poco de Cavex Bite&White ExSense en correctamente, compruebe si el paciente aplica un dedo limpio. Aplique el gel suavemente sobre todas las superficies en los dientes superiores e inferiores. Deje que el gel permanezca en los dientes durante 10 minutos. Escupa todo el gel

excesivo y no enjuague la boca con agua.

Con cubeta:
 Administre una banda estrecha de Cavex Bite&White ExSense sobre toda la cubeta. Coloque la cubeta en la boca y gírela suavemente hacia la izquierda y derecha para asegurar que el gel se distribuya sobre los dientes. Muerta suavemente en la cubeta y deje el gel en la boca durante 10 minutos. Saque la cubeta, escupa todo el gel excesivo y no enjuague la boca con agua. Enjuague la cubeta con agua fría.
 1. Inmediatamente después del uso, debe colocarse el tapón y cerrar el tubo.
 4. Para el mejor resultado, el paciente no debe comer ni beber al menos 30 minutos después de la aplicación.
 5. Používejte produkt denně po dobu 10 dnů nebo tak, jak vám doporučí zubní lékař.

ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos, lávese abundantemente con agua y acúdase a un médico. No utilizar el material una vez transcurrida su fecha de caducidad.

PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco, seco (libre de heladas) y protegido de la luz directa del sol.

Fabricado por Cavex Holland BV

Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se realiza según nuestro leal saber y entender, pero debe considerarse sólo como iniciación sin compromiso, también por lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros; no exime al cliente del examen propio de los productos suministrados por nosotros con el fin de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos se llevan a cabo fuera del alcance de nuestras posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiera de considerarse alguna responsabilidad por parte nuestra, ésta se limitará para cualquier daño y perjuicio, al valor de la mercancía suministrada por nosotros y empleada por el cliente. Se sobreentende que garantizamos la intachable calidad de nuestros productos de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

Cavex Bite&White ABC Master Kit : Sustav za izbjeljivanje kod kuće u 3 koraka

KROK A= AKTIVIRANJE:

CAVEX BITE&WHITE STAINLESS

OPIS

Aktivator za izbjeljivanje zuba i pasta za uklanjanje mrlja. Uklanjanje površinske mrlje i plak sa zuba. Pojačava postupak izbjeljivanja optimiziranjem pH vrijednosti u ustima.

AMBALAŽA

Tuba 35 ml - 50 gr.
- Blago abrazivno za caklinu/dentin
- Visoke vrijednosti čišćenja i poliranja
- Povećava pH vrijednost u ustima kao predtretman za izbjeljivanje
- Nije namijenjeno za redovitu uporabu

SASTOJCI CAVEX BITE&WHITE STAINLESS

Aqua, Sorbitol, hidratizirana silika, glicerol, eritritol, litijev magnezijev natrijev silikat, poloksamer, natrijev heksametafosfat, celulozna guma, ksantanova guma, fenoksietanol, natrijev saharin, aroma mente, limonen, CI 42090

OPIS

U Cavex Bite&White vodikov peroksid služi kao izbjeljivač. Dodan je u obliku karbamid peroksida da bi se zadobio dovoljno stabilan proizvod. Karbamid peroksid se brzo razgrađuje na radikale kisika i vodu. Tijekom postupka izbjeljivanja slobodni radikali napadaju spojeve ugljika sa dvostrukim vezama; oni su većinom izvor diskoloracije zubi.

AMBALAŽA

- Cavex Bite&White 3 ml ščena

AKTIVNI SASTOJCI CAVEX BITE&WHITE

- 16 % Karbamid peroksida - jednako 6 % vodikovog peroksida.
- 0,2 % Kalijevog nitrata - desenzibilizator
- 0,1 % Natrijevog fluorida - desenzibilizator

SASTAV

Karbamid peroxid, kalijev nitrat, natrijev fluorid, karbomer, glicerol, EDTA, kalijev hidroksid, ulje metvice, aqua.

INDIKACIJE ZA UPORABU

Cavex Bite&White je gel za izbjeljivanje zuba koji se koristi za posvjetljivanje boje prirodnih zuba. Cavex Bite&White se smije samo isporučiti od ili po preporuci stomatologa. Prije bilo kojeg postupka izbjeljivanja preporučuje se konzultacija sa kvalificiranim stomatologom da bi se isključili oralni ili zdravstveni problemi.

KONTRAINDIKACE

Preporučljivo je posavjetovati se sa liječnikom kod:
- Trudnica ili dojilja

- Osoba koje se trenutno liječe od teške bolesti
- Djece mlađe od 18 godina

KLINIČKI POSTUP

- Zabilježite početnu nijansu boje, ocijenite trenutno zdravlje zuba i pobrinite se da pacijent ima realna očekivanja o konačnim rezultatima.

- Provizorne ili privremene restauracije zuba mogu promijeniti boju tijekom postupka izbjeljivanja, dok će kompozitni ili polikarbonatni materijali ostati nepromijenjeni. Zbog toga bi pacijenti sa kompozitnim restauracijama trebali biti obaviješteni da postojeći kompoziti mogu zahtijevati zamjenu, jer će samo prirodni zubi izbjeljiti.

- Kod pacijenata koji zahtijevaju estetske ili adhezivne restauracije, pričekajte 2 tjedna nakon posljednjeg postupka izbjeljivanja kako bi se boja stabilizirala. Sve restauracije bi trebale biti netaknute ili ispravno zapečaćene s odgovarajućim privremenim materijalima.

- Korištenje zubne paste za osjetljive zube 2 tjedna prije i 2 tjedna nakon tretmana bi se trebalo preporučiti.

- Pacijentu uvijek treba upozoriti na moguću osjetljivost zuba ili iritaciju desni tijekom tretmana. Desni koje dođu u dodir sa izbjeljivačem mogu pocrveniti ili pobijeliti, ali normalna boja se vraća nakon nekoliko dana.

- Kako bi se izbjegla iritacija mekog tkiva, savjetujte pacijenta da ne prepunjava udlagu za izbjeljivanje, da obriše višak gela sa ruba desni i da temeljito ispere usta nakon Tretmana.

- Pobrinite se da pacijent nakon svakog tretmana vrati čep na špricu.

- Pacijent ne smije jesti, piti ili pušiti najmanje 30 minuta nakon svakog tretmana.

- Instruirajte pacijenta, u slučaju da nastane problem, da prekine tretman i da vam se odmah obrati.

- Konačna nijansa će se postići oko 2 tjedna nakon početka tretmana. Nakon tretmana treba dogovoriti termin za kontrolni pregled.

UPOZORNENI

- Sadrži fluorid.
- Sadrži vodikov peroxid.
- Izbjegavajte kontakt s očima.
- Držite van doseg djece.
- Ne koristite kod preosjetljivih zubi.
- Nemojte jesti, piti ili pušiti tijekom nošenja napunjene prilagodene udlage.
- Štetno ako se proguta.

UPUTE ZA PRVU POMOĆ

- Ako se proguta velika količina gela (više od 25% gela u šprici) odmah pijte vodu, ne izazivajte povraćanje i obratite se liječniku.

- U slučaju da gel ude u oči, držite kapke otvorene i neprekidno ispirajte oko tekućom vodom barem 15 minuta i obratite se liječniku. (sorbitol), glicerol, eritritol, litijev magnezijev
- U slučaju dodira sa odjećom, kožom ili kosom, natrijev silikat, hidroksiapatit, kalijev klorid, skinite kontaminiranu odjeću i ispirajte kožu ili kalijev nitrat, fenoksietanol, ksantanova guma, kosu tekućom vodom.

MOGUĆI ŠTETNI UČINCI

Štetni učinci koji mogu biti povezani sa upotrebom Cavex Bite&White uključuju, ali nisu - Nakon izbjeljivanja zubi u stomatološkoj ordinaciji Primjena, uporaba i obrada proizvoda su ograničeni na:
- Osvjetljeni zuba
Neki pacijenti mogu tijekom tretmana doživjeti povećanu osjetljivost zuba na hladnoću, dok drugi mogu imati nespecifičnu osjetljivost u zubima, desnim, jeziku, usnama ili grlu.

Uglavnom bi simptomi trebali nestati u roku od nekoliko dana nakon prekida tretmana.

Tretman se može nastaviti s kraćim, manje čestim primjenama dok željeni učinak izbjeljivanja nije postignut. Ako nelagodna i dalje ostaje, prekinite tretman.

- Irtacija desni
Udlage koje se protežu do desni mogu izazvati blagu do tešku iritaciju mekog tkiva. Ako udlage dobro pristaju, provjerite dali pacijent primjenjuje pravilnu količinu gela na pravilan način. Možda pacijent mora smanjiti količinu gela u svojim udlagama.

- Čuvajte na rashlađenom (<8°C) tamnom i suhom mjestu.
- Nemojte koristiti proizvod nakon isteka roka valjanosti.

SAVJET ZA ČUVANJE

- Čuvajte na rashlađenom (<8°C) tamnom i suhom mjestu.
- Nemojte koristiti proizvod nakon isteka roka valjanosti.

ODLAGANJE

- Odložite materijal u skladu sa lokalnim zakonom o upravljanju otpadom.

KORAK C = KONDICIONIRANJE: CAVEX BITE&WHITE EXSENSE

OPIS

Cavex Bite&White ExSense je gel na vodenoj bazi sa aromom mente i sadrži hidroksiapatit i kalijev nitrat. Cavex Bite&White ExSense smanjuje osjetljivost i pojačava bjelinu zuba zahvaljujući remineralizaciji hidroksiapatitom.

AMBALAŽA

Tuba 42 ml - 50 gramu (dovoljno za oca 20 tretmana)

CAVEX BITE&WHITE EXSENSE GLAVNI SASTOJCI

Hidroksiapatit 2%, kalijev nitrat 0,1%

SASTAV

Aqua, hidrogenizirani škrobod hidrolizat
Ne koristite Cavex Bite&White ExSense kod alergije na mentu ili bilo koji od ostalih sastojaka.

INDIKACIJE ZA UPORABU

- Osvjetljeni zuba
- Nakon profesionalni čišćenja zubi
- Sprječavanje i kontrola osjetljivosti

KONTRAINDIKACIJE

- Osvjetljeni zuba
- Nakon profesionalni čišćenja zubi
- Sprječavanje i kontrola osjetljivosti

PROCEDURA POUŽITI

1. Četkicom za zube i zubnim koncem pripremiti i očistiti zube.
2. Primjena:

Bez uhynog: Temeljito operite ruke vodom i sapunom. Nanesite malu količinu Cavex Bite&White ExSense-a na čist prst. Lagano nanesite gel na sve površine gornjih i donjih zuba. Pustite da gel djeluje 10 minuta na zubima. Ispljunite eventualni višak gela i isperite usta vodom.

Sa udlagom: Nanesite Cavex Bite&White ExSense po cijeloj udlagi. Unesite udlagu i lagano ju okrećite lijevo-desno da se gel dobro raspodijeli po zubima. Zatim lagano zagrizite udlagu i pustite da gel djeluje 10 minuta. Izvadite udlagu, ispljunite eventualni višak gela i isperite usta vodom. Udlagu isperite hladnom vodom.

3. Uvijek zatvorite tubu čepom odmah nakon uporabe.
4. Za najbolji rezultat: nemojte jesti ili piti najmanje 30 minuta nakon primjene.
5. Koristite proizvod svakodnevno tokom 10 dana ili slijedite upute vašeg stomatologa.

UPOZORENJA I UPUTE ZA PRVU POMOĆ

U slučaju dodira sa očima: temeljito ispirati sa puno vode i potražiti liječničku pomoć. Ne koristite proizvod nakon isteka roka trajanja.

SAVJET ZA ČUVANJE

Čuvajte na hladnom, suhom mjestu zaštićenom od mraza i direktnog sunca.

Proizvođač: Cavex Holland BV

Naš tehnički savjet usmeni, pismeni ili putem pokusa dajemo u dobroj vjeri, ali bez jamstva; a to se tyka i na slucajeve koji uključuju vlasnička prava neke treće strane. To vas ne oslobađa obveze testiranja proizvoda koje vam isporučujemo obzirom na njihovu prikladnost za područje primjene i uporabu.

Naš tehnički savjet usmeni, pismeni ili putem pokusa dajemo u dobroj vjeri, ali bez jamstva; a to se tyka i na slucajeve koji uključuju vlasnička prava neke treće strane. To vas ne oslobađa obveze testiranja proizvoda koje vam isporučujemo obzirom na njihovu prikladnost za područje primjene i uporabu.

Naš tehnički savjet usmeni, pismeni ili putem pokusa dajemo u dobroj vjeri, ali bez jamstva; a to se tyka i na slucajeve koji uključuju vlasnička prava neke treće strane. To vas ne oslobađa obveze testiranja proizvoda koje vam isporučujemo obzirom na njihovu prikladnost za područje primjene i uporabu.

Cavex Bite&White ABC-Masterkit:
hjemmeblegesystem i 3 trin

TRIN A= AKTIVERING: CAVEX BITE&WHITE STAINLESS

BESKRIVELSE

Bélicí aktivátor zubů a pasta na odstraňování skvrn. Fjerner pletter og plak på tænderne. Forstærker blegningsbehandlingerne ved forhøjelse af pH-værdien i munden.

EMBALAGE

Tuba 35ml - 50g
- Mildt slibende pro žalud / dentin.
- Høje rensende - og polerende værdier.
- Forhøjer pH-værdien i munden som forbehandling inden blegning af tænderne.
- Ikke beregnet til hyppigt brug.

BESTANDDELENE I CAVEX BITE&WHITE STAINLESS

Vanda, sorbitol, oxid křemčitý, glycerin, lithium magnesiumnatriumsilikát, poloxamer, natriumhexametáfosfát, celulósegummi, xanthangummi, fenoxyletanol, natriumsacharin, mynte aroma, limonen, CI 42090

TRIN B= BLEGNING: CAVEX BITE&WHITE

BESKRIVELSE

Hydrogenperoxid fungerer som blegemiddel i Cavex Bite&White. Det bliver tilsat som karbamid peroxid for at opnå et tilstrækkeligt stabilt produkt. Karbamid peroxid opløses hurtigt til iltradikaler og vand. Under blegningsprocessen angriber de frie radikaler de dobbelte kulstofforbindelser, som normalt er kilden til misfarvning af tænderne.

EMBALAGE

- Cavex Bite&White 3 ml sprøjter

AKTIVE BESTANDDELE I CAVEX BITE&WHITE

- 16 % Karbamidperoxid - svarende til 6 % hydrogenperoxid
- 0,2 % Kaliumnitrat desenzibilizator
- 0,1 % Natriumfluorid desenzibilizuje

BESTANDDELENE

Karbamidperoxid, kaliumnitrat, natriumfluorid, karbomer, glycerin, EDTA, kaliumhydroxid, pebermynteolie, aqua.

INDIKATION FOR ANVENDELSE

Cavex Bite&White er en gel til tandblegning, hvorved den naturlige tandfarve bleges. Cavex Bite&White må kun udleveres efter anvisning fra tandlæge. En konsultation hos en anerkendt tandlæge forud for hver blegningsbehandling anbefales for at udelukke mund- eller sundhedsproblemer.

KONTRAINDIKACE

Det anbefales at konsultere en læge i følgende tilfælde:

- gravide kvinder, og kvinder som ammer.
- personen, som behandles for en alvorlig sygdom.
- børn mladší 18 let.

KLINICKÝ POSTUP

- Fastlæg farven ved starten, evaluer det nuværende tandsæts sundhed og drag omsorg for, at patientens forventninger til slutresultatet er realistiske.
- Provisoriske- eller midlertidige tandrestaurationer kan misfarves under blegningsprocessen, medens komposit - eller polycarbonat materialer ikke påvirkes. Til patienter med kompositrestaurationer bør det derfor oplyses, at bestående kompositen muligvis må udskiftes, eftersom kun naturlige tænder bliver mere hvide.
- Vent med patienter, som har behov for en æstetisk eller adhæsiv reparation, til 2 uger efter den sidste blegningsbehandling for at farven kan stabilisere sig. Alle restaureringer bør være intakte, eller godt forseglet med korrekt midlertidigt materiale.
- Brug af en tandpasta for følsomme tænder, 2 uger før behandlingen indtil 2 uger efter, bør anbefales.
- Patienten bør altid advares om følsomme tænder eller irriteret tandkød under behandlingen. Tandkødet, som komme i berøring med midlet, kan blive rødt eller hvidt, men får efter nogle dage dets normale farve tilbage igen.
- Tilråd patienten - for at undgå irritation af blødt væv - ikke at overfylde tray, at fjerne overflødig gel ved tandkødet grænser og at skylle munden grundigt efter behandlingen.
- Gør patienten opmærksom på, at hættens skal sættes på sprøjten efter hver behandling.
- Patienten må i mindst 30 minutter efter hver behandling, ikke spise, drikke eller ryge.
- Instruer patienten om at stoppe behandlingen og at kontakte dig omgående, hvis der opstår et problem.
- Den endelige farve opnås cirka 2 uger efter behandlingens begyndelse. Efter behandlingen bør der laves en aftale for en efterfølgende konsultation.

ADVARSLER

- Indeholder fluorid.
- Indeholder peroxid vodka.
- Undgå kontakt med øjnene.
- Opbevares udenfor børns rækkevidde.
- Må ikke bruges ved overfølsomme tænder.
- Der må ikke spises, drikkes eller ryges, når der er et efter mål fremstillet blegningstray i munden.
- Farligt at sluge.

INSTRUKCE PRO PRVNÍ HLÁŠENÍ

- Hvis der sluges en større mængde gel (mere end 25% af sprøjtes gel): drik omgående vand, forcer ikke opkastning og rådfør med læge.
- Hvis der kommer gel i øjnene: træk øjenlågene op, skyld øjet mindst 15 minutter uafbrudt med vand og rådfør med læge. Ved kontakt med tøj, hud eller hår: fjern det beskadede tøj og afskyl hud eller hår under rindende vand.

MULIGE SKADELIGE VIRKNINGER

Skadelige virkninger, som kan henføres til brug af Cavex Bite&White er blandt andet, men ikke udelukkende:

- Følsomhed
Nogle patienter kan under behandlingen opleve, at tænderne bliver ekstra følsomme for kulde; andre oplever uspecifik følsomhed i tænder, tandkød, tunge, læber eller hals. Normalt skal symptomerne forsvinde få dage efter behandlingen. Behandlingen kan fortsættes med kortere, mindre frekvente applikationer til den ønskede blegningseffekt er opnået. Hvis ubehaget ikke ophører, bør behandlingen afsluttes.
- Podráždění na tandem
Blegnings-ske, som når hen over tandkødet, kan forårsage mindre til alvorlig irritation af væv. Hvis en ske passer godt, kontroller da om patienten har anvendt den korrekte mængde på den rigtige måde. Måske skal patienten reducere mængden af gel i deres ske.

RÅD TIL OPBEVARING

- Opbevares kølet (<8°C) på et mørkt, tørt sted.
- Brug ikke produktet efter holdbarhedsdatoens udløb.

FJERNELSE

- Fjern produktet ifølge de lokale regler for affald.

TRIN C= KONDITIONERING: CAVEX BITE&WHITE EXSENSE

BESKRIVELSE

Cavex Bite&White ExSense er en vandbaseret gel med mynte aroma og indeholderen hydroxyapatit og kaliumnitrat. Cavex Bite&White ExSense formindsker følsomhed og forstærker tændernes hvide farve med re-mineralisering af hydroxyapatit.

EMBALAGE

Tuba 42 ml - 50 gramů (cca 20 kusů)

HOVEDBESTANDDELE I CAVEX BITE&WHITE EXSENSE:

Hydroxyapatit 2%, kaliumnitrat 0,1%

SAMENSTELLING

Aqua, hydrogenated stivelseshydrolysat (sorbitol), glycerin, erythritol, lithium magnesiumnatriumsilikat, hydroxyapatit, kaliumklorid, kaliumnitrat, fenoxyletanol, xanthangummi, tetranatriumpyrofosfat, vinsyre, mynte aroma, natrium sacharin.

INDIKATIONER INDEN ANVENDELSE

- Efter blegning af tænder på tandklinik og/eller hjemme.
- Efter en professionel tandrensning.
- Modvirker og formindsker følsomhed.

KONTRAINDIKACE

Brug ikke Cavex Bite&White ExSense ved allergi over for mynte eller én af de øvrige bestanddele.

FREMANGSMÅDEN VED BRUG

- 1 Forberedelse af tænderne og rens ved at pudse og flosse.
- 2 Anvendelse:

Uden blegeske:

Vask hænderne grundigt med sæbe og vand. Anbring lidt Cavex Bite&White ExSense på en ren finger. Fordel gelen let hen over alle over- og undertænders overflader. Lad gelen indvirke i 10 minutter. Spyt eventuelt overflødig gel ud og skyl ikke munden med vand.

Med blegeske:

Anbring en stribe Cavex Bite&White ExSense på hele blegeske. Indsæt ske og drej denne forsigtigt til venstre og højre, således at gelen fordeles godt henover tænderne. Bid derefter

langsomt på skeen og lad gelen indvirke 10 minutter. Fjern skeen, spyt eventuelt overflødig gel ud og skyl ikke munden med vand. Afvask skeen med koldt vand.

- 1 Drej hæften straks efter brug fast på tuben.
- 2 For et optimalt resultat: spis og drik ikke inden for 30 minutter efter behandlingen.
- 3 Brug produktet hver dag i 10 dage, eller efter anvisning af din tandlæge.

ADVARSEL OG FØRSTE HJÆLPS INSTRUKTIONER

Vedeni kontaktú s úzivatelí: Skyl grundigt med meget vand og søg lægehjælp. Brug ikke produktet efter holdbarhedsdatoens udløb.

OPBEVARING

Opbevares på køligt, tørt (frostfrit) sted, beskyttet mod direkte sollys.

Fremstillet af Cavex Holland BV

Vores tekniske rådgivning hvad enten den er givet mundtligt, skriftligt eller ved afprøvning af produktet gives i god tro, men er uden garanti. Dette gælder også i tilfælde der involverer tredjeparts ejendomsret. Det fritager ikke brugeren for forpligtigelsen til at kontrollere at det produkt vi har leveret er egnet til de fremgangsmåder og anvendelsesområder som det er påtænkt anvendt til. Da vi ikke har nogen kontrol over anvendelse, fremgangsmåde og behandling af dette produkt, sker brugen helt på brugerens ansvar. Skulle der, på trods af disse ansvarsbetingelser, opstå et retskrav vil dette være begrænset til værdien af produkter leveret af os og anvendt af Dem. Vi vil naturligvis levere produkter af et ensartet kvalitet inden for rammerne af vores generelle salgs- og leveringsbetingelser.

Cavex Bite&White ABC Master Kit: 3 lépéses otthoni fehérítő rendszer

A. LÉPÉS= AKTIVÁLÁS:

CAVEX BITE&WHITE STAINLESS

LEÍRÁS

Fogfehérítő aktivátor és folteltávolító krém. Eltávolítja a felszíni foltokat és a plakot a fogakról. A száj pH-jának optimálisra való beállításával fokozza a fehérítő kezelések hatását.

KISZERELÉS

Tubus, 35 ml - 50 g
 - Enyhén koptató hatású a fogzománca és a dentinre
 - Intenzív tisztító és polírozó hatású.
 - A fogfehérítést előkészítő kezelésként növeli a száj pH-ját.
 - Nem a rendszeres használatra.

A CAVEX BITE&WHITE STAINLESS ÖSSZETEVŐI

Víz, szorbitol, hidrátalt szilícium-dioxid, glicerin, eritritol, lítium-magnézium-nátrium- szilikát, poloxamer, nátrium-hexametafoszfát, cellulózgumi, xantángumi, fenoxietanol, nátrium-szacharinát, mentol aroma, limonén, CI 42090

B. LÉPÉS= FEHÉRÍTÉS:

CAVEX BITE&WHITE

LEÍRÁS

A Cavex Bite&White gél fehérítőszerként hidrogénperoxidot tartalmaz. A termék stabilitása érdekében ezt karbamid-peroxid formájában adják a gélhez. A karbamid- peroxid víz és oxigénnel keletkezése közben, nagy sebességgel elbomlik.

A fehérítési eljárás során a szabad gyökök megtámadják azokat a szén-szén kettős kötések, amelyek a fognon megjelenő színek (foltok) többségét okozzák.

KISZERELÉS

- Cavex Bite&White 3 ml-es fecskendők

A CAVEX BITE&WHITE HATÓANYAGAI

- 16% karbamid-peroxid - 6% hidrogén-peroxidtal egyenértékű
 - 0,2% kálium-nitrát, érzékenységet csökkentő szer
 - 0,1% nátrium-fluorid, érzékenységet csökkentő szer

ÖSSZETÉL

Karbamid-peroxid, kálium-nitrát, nátrium-fluorid, karbomer, glicerin, EDTA, kálium-hydroxid, borsmentaolaj, víz.

HASZNÁLATI JAVALLATOK

A Cavex Bite&White - fogfehérítő gél, amely a természetes fogak színének világosabbá tételére szolgál. A Cavex Bite&White gél csak fogászati szakember által, vagy annak rendelésére adható ki. A fehérítő eljárást megelőzően ajánlatos képesített fogszakorvossal konzultálni az esetleges rejtett szájüregi vagy egészségügyi problémák kizárása céljából.

ELLENJAVALLATOK

A következő esetekben ajánlatos orvosi tanácsot kérni:
 - Terhes és szoptató nők
 - Súlyos betegség miatt kezelés alatt álló személyek
 - 18 év alatti gyermekek

KLINIKAI ELJÁRÁS

- Készítsen feljegyzést a kiinduló színárnyalatról, vizsgálja meg a fogak aktuális egészségi állapotát, és gondoskodjék arról, hogy a betegnek reális elvárásai legyenek a várható eredményről.
 - Az átmeneti vagy ideiglenes pótlások/tömések színe a fehérítő eljárás során elhalványodhat, míg a kompozit anyagok és a polikarbonátok színe nem változik. Ezért a kompozit tömésekkel rendelkező betegeknek el kell mondani: lehet, hogy a meglévő, kompozit anyagu töméseiket ki kell cserélni, mivel csak a természetes fogak fognak kifehéredni.
 - Esztétikai vagy adhéziós pótlásokkal rendelkező betegeknél az utolsó fehérítő kezelés után 2 hetet várni kell a szín stabilizálódására. Minden tömésnek épnek, vagy megfelelő ideiglenes anyagokkal gondosan lezártnak kell lennie.
 - A betegnek ajánlani kell, hogy a kezelés előtt 2 héttel kezdjen fogérzékenységet csökkentő fogkrémet használni, és ezt a kezelést után 2 hétig folytassa.
 - A beteget mindig figyelmeztetni kell a kezelés során jelentkező fogérzékenységre vagy íny-irritációra. Az ínynek a szerrel érintkezésbe kerülő területi kivörösödhetnek vagy kifehéredhetnek, de néhány nap múlva visszanyerik eredeti színüket.
 - A szövetek irritációjának elkerülése érdekében tanácsos a betegnek, hogy ne töltsön túlsó a színek, törölje le a folsóleges gél az íny vonaláról, és a kezelést után alaposan öblítse ki hogy a száját.
 - Gondoskodjék arról, hogy a beteg minden kezelés után visszahelyezze a fecskendő kupakját.
 - A kezelés után a betegnek 30 percig nem szabad sem ennie, sem innia, sem dohányoznia.
 - Utasítsa a beteget, hogy ha bármilyen

probléma jelentkezik, azonnal hagyja abba a kezelést és forduljon Önhöz.
 - A végleges színárnyalat a kezelés elkezdése után körülbelül 2 héttel alakul ki. A kezelést követően utánkövetési vizsgálatot kell megbeszélni.

FIGYELMEZTETÉSEK

- Fluoridot tartalmaz.
 - Hidrogén-peroxidot tartalmaz.
 - Nem árukerülő a szembe.
 - Gyermekektől elzárva tartandó.
 - Ne használja ismerten túlérzékeny fogakon.
 - Az egyéni mérethez igazított, megtöltött sínek viselése közben nem szabad sem enni, sem inni, sem dohányozni.
 - 18 év alatti gyermekek

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

- Nagy mennyiségű (a fecskendőben lévő gél 25%-ánál több) gél lenyelése esetén azonnal igyon vizet, ne alkalmazzon hánytatást, és hívjon orvost.
 - Ha a gél a szembe kerül, tartsa széthúzva a szemhéjakat, legalább 15 percen át folyamatosan öblítse a szemet vízzel, és hívjon orvost.
 - Ha a gél a ruházatra, a bőrre vagy a hajra kerül, vegye le a szennyezett ruházatot, és folyóvízzel öblítse le a bőrt vagy a haját.

LEHETSÉGES NEMKÍVÁNATOS HATÁSOK

A Cavex Bite&White használatával kapcsolatos nemkívánatos hatások többek között a következők lehetnek:

- Érzékenység
 Egyes betegek a fogak fokozott hidegérzékenységét tapasztalják a kezelés során, mások pedig a fogak, az íny, a nyelv, az ajkak vagy a torok nem specifikus érzékenységről számolnak be. A tünetek általában a kezelés befejezése után néhány nappal megszűnnek. A kezelés rövidebb, kevésbé gyakori alkalmazásokkal folytatható a kívánt fehérítő hatás eléréséig. Ha a kellemetlen érzés fennmarad, a kezelést abba kell hagyni.
 - Ínyirritáció
 Az ínyre is ráhajló sínek a légszövetek enyhéttől súlyosig terjedő irritációját okozhatják. Ha a sínek pontosan illeszkednek, a beteg a megfelelő módon, a megfelelő mennyiségű gélt alkalmazza-e. Lehet, hogy a betegnek csökkentenie kell a sínekbe töltött gél mennyiségét.

TÁROLÁSI TÁJÉKOZTATÓ

- Hűtve (8 °C alatti hőmérsékleten) tárolandó száraz, sötét helyen.
 - A lejárati idő után nem szabad felhasználni.

HULLADÉKBA HELYEZÉS

- Az eszközt a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően kell hulladékba helyezni.

C. LÉPÉS= KONDICIONÁLÁS:

CAVEX BITE&WHITE EXSENSE

LEÍRÁS

A Cavex Bite&White ExSense - mentaaromával kiegészített, vizes bázisú gél, amely hidroxipapatit és kálium-nitrátot tartalmaz.
 A Cavex Bite&White ExSense csökkenti az érzékenységet, és a hidroxipatit útján történő remineralizáció segítségével fokozza a fogak fehérségét.

KISZERELÉS

Tubus, 42 ml - 50 gramm (körülbelül 20 kezelésre elegendő)

A CAVEX BITE&WHITE EXSENSE FŐ:

Hidroxipatit 2%, kálium-nitrát 0,1%

ÖSSZETÉL

Víz, hidrogénezett keményítőhidrolizátum (szorbitol), glicerin, eritritol, lítium-magnézium-nátrium-szilikát, hidroxipatit, kálium-klorid, kálium-nitrát, fenoxietanol, xantángumi, tetranátrium-pirofoszfát, borkősav, mentol aroma, nátrium-szacharinát.

HASZNÁLATI JAVALLATOK

- Rendelőben vagy otthon végzett fogfehérítés után
 - Professzionális fogtisztítás után
 - Érzékenység megelőzése és csökkentése

ELLENJAVALLATOK

Mentaaromával vagy bármelyik összetevővel szembeni allergia esetén ne használja a Cavex Bite&White ExSense gélt.

KEZELÉSI ELJÁRÁS

1. Készítse elő és tisztítsa meg a fogakat fogkefe és fogszelvény segítségével.
 2. Alkalmazás:

Sin nélkül:
 Szappannal és vízzel alaposan mosson kezét. Nyomjon ki egy kevés Cavex Bite&White ExSense gélt egyik ujjára. Gyengéden kenje fel a gélt az alsó és felső fogak minden felületére. 10 percig hagyja a gélt a fogakon. Köpje ki a fölösleges gélt, és ne öblítse ki a száját vízzel. Siñ je plná:
 Nyomjon ki vékony szalagnyi Cavex Bite&White ExSense gélt végig az egész sínbe. Tegye be a sínt, és gyengéden mozgassa körbe, jobbra és balra, hogy a gél mindenhova eljusson a

fogakon. Óvatosan harapjon rá a sínre, és 10 percig hagyja a gélt a helyén. Vegye ki a sínt, köpje ki a fölösleges gélt, és ne öblítse ki a száját vízzel. Öblítse ki a sínt hideg vízzel.

1. A tubust használat után azonnal zárja le a kupakkal.
 4. A legjobb eredmény érdekében az alkalmazás után legalább 30 percig ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon.
 5. A terméket használja 10 napon át napon, vagy kövesse az Önt ellátó fogászati szakember utasításait.

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

Ha a termék szembe kerül, bő vízzel alaposan öblítse ki, és forduljon orvoshoz. A lejárati idő után nem szabad használni az anyagot.

TÁROLÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Hűvös, száraz (fagymentes) helyen, közvetlen napfénytől védve tárolandó.

Gyártja: Cavex Holland BV

Használati tanácsainkat cégünk részéről a legjobb jóhiszemben adjuk, akár írásban, akár szóban, akár bemutató alapján, de a garanciaavállalás kizárásává. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha harmadik személy tulajdonosi jogairól van szó. Ez nem mentesíti Önöket az alól, hogy az általunk szállított termékeket a felhasználásra és feldolgozására nem lehetünk befolyásolókkal, ennél fogva az említettek teljes mértékben az Önök felelősségi körébe tartoznak. Amennyiben ezen kötelezettség következtében bármiféle károsodás keletkezik, anyagi felelősségünk legfeljebb a szállításunk tárgyát képező, és az Önök által felhasznált termékek értékére korlátozódik. Mi a magunk részéről természetesen termékeinkre állandó minőséget biztosítunk az Általános értékesítési és szállítási feltételeinknek megfelelően.

Cavex Bite&White ABC Master Kit.
Sistema de branqueamento para utilização doméstica em 3 etapas

PASSO A= ATIVAÇÃO: CAVEX BITE&WHITE STAINLESS

DESCRIÇÃO

Ativador de branqueamento de dentes e pasta saúde (oral), para eliminação de manchas. Elimina manchas superficiais e placa dos dentes. Otimiza os tratamentos de branqueamento aumentando o Doporučuje valor do pH na boca.

EMBALAGEM

Tubo 35ml - 50g
- Ligeiramente abrasivo para o esmalte/dentina
- Alta capacidade de limpeza e polimento.
- Aumenta o valor do pH na boca como tratamento prévio para o branqueamento dos dentes
- Não concebido para utilização regular

INGREDIENTES DE CAVEX BITE&WHITE STAINLESS

Água, sorbitol, sílica hidratada, glicerina, eritritol, lítio silicato de magnésio e sódio, poloxamer, hexametáfosfato de sódio, goma de celulose, goma de xantana, fenoxietanol, sacarina de sódio, aroma de menta, limoneno, CI 42090

PASSO B = BRANQUEAMENTO: CAVEX BITE&WHITE

DESCRIÇÃO

O agente branqueador de Cavex Bite&White é o peróxido de oxigénio, que é adicionado como peróxido de carbamida, a fim de obter um produto suficientemente estável. O peróxido de carbamida decompõe-se rapidamente em radicais de oxigénio e água. Durante o processo de branqueamento, os radicais livres atacam as ligações de carbono duplas responsáveis pela maior parte das manchas nos dentes.

EMBALAGEM

- 3 sérum o volume 3 ml Cavex Bite&White

INGREDIENTES ATIVOS CAVEX BITE&WHITE

- 16 % peróxido de carbamida odpovídá 6 % peróxido de hidrogénio
- 0,2 % de nitrato de potássio dessensibilizante
- 0,1 % de fluoreto de sódio dessensibilizante

COMPOSIÇÃO

Peróxido de carbamida, nitrato de potássio, fluoreto de sódio, carbómero, glicerina, EDTA, hidróxido de potássio, óleo de menta, água.

INSTRUKCE K POUŽITÍ

Cavex Bite&White é um gel destinado ao branqueamento da cor natural dos dentes. Cavex Bite&White só deve ser dispensado por receita de profissionais da área odontológica. Antes de qualquer processo de branqueamento, recomenda-se a consulta de um médico dentista para garantir que não existem problemas de

KONTRAINDIKACE

seguientes casos:

- Mulheres grávidas ou a amamentar
- Pessoas sob tratamento de doença grave
- Crianças e jovens com menos de 18 anos

PROCEDIMENTO CLÍNICO

- Registe a cor de partida, avalie a saúde oral atual do paciente e assegure-se que o paciente temáticas realistas sobre os resultados finais.
- As restaurações provisórias ou temporárias podem sofrer alteração de cor durante o processo de branqueamento, mas os materiais compostos ou de policarbonato não serão afetados. Assim, os pacientes com restaurações de composto de resina devem ser alertados de que os compostos existentes podem ter de ser substituídos, uma vez que apenas os dentes naturais serão branqueados.

- Os pacientes que necessitam de restaurações estéticas ou adesivos, deverão aguardar 2 semanas após o último tratamento de branqueamento para permitir a estabilização da cor. Todas as restaurações devem encontrar-se intactas ou bem vedadas com materiais temporários adequados.
- Deve ser aconselhada a utilização de uma pasta dentífrica para alívio da sensibilidade 2 semanas antes até 2 semanas depois o tratamento.
- Os pacientes devem sempre ser alertados sobre a sensibilidade dentária ou irritação das gengivas durante o tratamento. As áreas das gengivas que entram em contacto com o produto poderão ficar vermelhas ou brancas, com mas recuperam a cor normal após alguns dias.
- De forma a evitar a irritação dos tecidos moles, o paciente deve ser aconselhado a evitar sobrecarga das moldeiras, a retirar qualquer excesso de gel ao longo da gengiva as gengivas podem causar irritação ligeira e a enxaguar cuidadosamente a boca após o a grave nos tecidos moles. Se as moldeiras tratamento.
- Aconselhe o paciente a colocar sempre a tampa na seringa após cada tratamento.
- O paciente não deve comer, beber ou fumar durante pelo menos 30 minutos após cada tratamento.

- Aconselhe o paciente a interromper o tratamento e a contactar de imediato o dentista no caso de ocorrência de qualquer problema.
- A cor final será atingida cerca de 2 semanas após o início do tratamento. Após o tratamento, deve ser efetuada uma consulta de controle.

AVISOS

- Contém flúor
- Contém peróxido de hidrogénio
- Vyhnete se kontaktu s ohlami
- Manter fora do alcance das crianças
- Não usar em caso de dentes hipersensíveis
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização das moldeiras com o produto
- Nocivo quando ingerido

INSTRUÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS

- Se for ingerida uma grande quantidade de produto (mais de 25% do gel na seringa), beber água de imediato, não induzir o vômito e consultar um médico.
- Pokud se gel dostane do kontaktu s očními žlázami, ponechte palpebras abertas a průběžně omývejte oční žlázy proudem vody po dobu nejméně 15 minut a kontaktujte lékaře.
- V případě kontaktu s vestuário, pele nebo cabelo, stáhněte rouču.
- contaminada e lavar a pele ou o cabelo com água corrente.

POSSÍVEIS EFEITOS ADVERSOS

Os efeitos adversos eventualmente associados à utilização de Cavex Bite&White incluem, mas não estão limitados a:

- Sensibilidade
- Alguns pacientes podem sentir maior sensibilidade dentária ao frio durante o tratamento, enquanto outros podem sentir sensibilidade não específica nos dentes, gengivas, língua, lábios ou garganta.
- Em geral, os sintomas devem desaparecer dentro de alguns dias após a interrupção do tratamento. O tratamento pode ser continuado até que o efeito de branqueamento desejado tenha sido alcançado. Se o desconforto persistir, o tratamento deve ser interrompido.
- Irritação das gengivas
- As moldeiras que entram em contacto com as gengivas podem causar irritação ligeira e a enxaguar cuidadosamente a boca após o a grave nos tecidos moles. Se as moldeiras encaixarem corretamente, verificar se o paciente aplica a quantidade correta e de forma adequada. O paciente pode ter de reduzir a quantidade de gel nas moldeiras.

CONSELHO DE ARMAZENAMENTO

- Uchovávejte v chladu (<8°C) v místním prostředí.
- Não usar o produto após expiração da data de validade.

ELIMINAÇÃO

- Elimine os resíduos do produto de acordo com as regulamentações locais sobre resíduos.

PASSO C= CONDIIONAMENTO: CAVEX BITE&WHITE EXSENSE

DESCRIÇÃO

Cavex Bite&White ExSense é um gel à base de água com aroma de menta que contém hidroxiapatite e nitrato de potássio. Cavex Bite&White ExSense diminui a sensibilidade e aumenta a branquura dos dentes por remineralização com hidroxiapatite.

EMBALAGEM

Tubo 42 ml - 50 gramů (suficiente para cerca de 20 tratamentos)

PRINCIPAIS INGREDIENTES DE CAVEX BITE&WHITE EXSENSE

Hidroxiapatit 2%, nitrato de potássio 0,1%

COMPOSIÇÃO

Água, hidrolisado de amido hidrogenado (sorbitol), glicerina, eritritol, silicato de magnésio gelo) e protegido da luz solar direta. de lítio de sódio, hidroxiapatite, cloreto de potássio, nitrato de potássio, fenoxietanol, goma xantana, pirofosfato tetrassódico ácido tartárico, aroma de menta, sacarina de sódio.

INSTRUKCE K POUŽITÍ

- Após branqueamento dentário na clínica ou em casa
- Após limpeza dentária profissional
- Prevenção e controle da sensibilidade

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte Cavex Bite&White ExSense v případě alergie na mentu nebo jiných alergenů. restantes ingredientes.

PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO

1. Preparar e limpar os dentes usando escova de dentes e fio dental.
2. Použití:

Sem moldeira:

Lavar as mãos cuidadosamente com água e sabão. Colocar uma pequena quantidade de Cavex Bite&White ExSense sobre o dedo limpo. Aplikujte gel šetrně na všechny povrchové plochy horních a dolních zubů. Nechte gel působit na zuby po dobu 10 minut.

minut. V nadměrném množství gel rozetřete a ho vodou.

Com moldeira:

Colocar uma pequena tira de Cavex Bite&White ExSense sobre toda a moldeira. Inserir a moldeira e movimentá-la suavemente da esquerda para a direita de forma a

assegurar que o gel é distribuído entre os dentes. Morder suavemente a moldeira e deixar o gel atuar durante

10 minut. Vratte moldeiru zpět, namačkejte gel do excesso e não enxaguar a boca com água. Enxaguar a moldeira com água fria

1. Colocar sempre a tampa no tubo imediatamente após a utilização.
4. Abyste dosáhli nejlepších výsledků, nepijte ani nejzte po dobu 30 minut před aplikací.
5. Používejte přípravek každý den, po dobu 10 dnů nebo podle pokynů svého zubního lékaře.

AVISOS E INSTRUÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS

V případě kontaktu s olejem se vydatně vymyjte vodou a poradte se s lékařem. Não usar o produto após expiração da data de validade.

CONSELHO DE ARMAZENAMENTO

Guardar em local fresco, seco (ao abrigo do

Fabricado por Cavex Holland BV

As nossas recomendações relativas à aplicação técnica oral, por escrito ou por meio de ensaios são, segundo os nossos critérios, de confiança, no entanto apenas são válidas instruções/ indicações sem compromisso, igualmente com respeito a eventuais direitos de protecção de terceiros. Eles não o librem da obrigação de controlar os produtos que nós lhe fornecemos relativamente à sua respectiva capacidade face aos processos e objectivos em questão.

A aplicação, a utilização e a elaboração dos produtos tem lugar fora do nosso campo de controle. Elas são por isso de sua responsabilidade. Em caso de dano, esta última limita-se ao valor dos bens que nós fornecemos e que foram utilizados por si. Naturalmente que garantimos a boa qualidade dos nossos produtos, em conformidade com os critérios mencionados relativos às nossas condições gerais de venda e de fornecimento.

Cavex Bite&White ABC Master-set:
Hemlekningsssystem i 3 steg

STEG A= AKTIVERING: CAVEX BITE&WHITE STAINLESS

BESKRIVNING

Tandblekningsaktivering & pasta för fläckborttagning. Tar bort fläckar på tandytan och placar från tänderna. Förstärker blekningsbehandlingar genom att pH-värdet i munnen höjs.

FÖRPACKNING

Tub 35 ml - 50 g
- Milt slipande av emalj / dentin.
- Höga rengörings- och poleringsvärden.
- Höjer pH-värdet i munnen som förbehandling
- Vidél jsem tandblekning.
- Inte avsett för regelbunden användning.

INGREDIENSER I CAVEX BITE&WHITE STAINLESS

Voda, sorbitol, kiselhydrat, glycerin, erytritol, litiummagnesiumnatriumsilikat, poloxamer, natriumhexametrafosfat, celulosagummi, xanthangummi, fenoxetyanol, natriumsackarin, mintarom, limonen, CI 42090

STEG B= BLEKNING: CAVEX BITE&WHITE

BESKRIVNING

Blekmedlet i Cavex Bite&White är väteperoxid. Det läggs till som karbamidperoxid för att få en tillräckligt stabil produkt. Karbamidperoxididen bryts snabbt ned till syreradikaler och vatten.

Pod blekningsprocessen anfaller de fria radikalerna de dubbla kolbindningar som är källan till de flesta tandmissfärgningarna.

FÖRPACKNING

- Cavex Bite&White 3 ml-sprutor

AKTIVA INGREDIENSER I CAVEX BITE&WHITE

- 16 % karbamidperoxid - motsvarar 6 % väteperoxid
- 0,2 % kaliumnitrat-desenzibilizator
- 0,1 % natriumfluorid-desenzibilizator

SAMMANSTÄLLNING

Karbamidperoxid, kaliumnitrat, natriumfluorid, karbomer, glycerin, EDTA, kaliumhydroxid, pepparmyntsolja, vatten.

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING

Cavex Bite&White är ett tandblekningsgel som används för att bleka färgen på naturliga tänder. Cavex Bite&White ska endast användas av eller enligt instruktioner av tandvårdspersonal. Vi rekommenderar att du samråder med din tandläkare före varje form av blekning, för att utreda eventuella

bakomliggande (tand)hälsoproblem.

KONTRAIKATIONER

Vi rekommenderar följande grupper att kontakta läkare innan produkten används:
- gravida och ammande kvinnor
- personer som behandlas för en allvarlig sjukdom
- dotloda lo 18 let

KLINICKÉ VYŠETŘENÍ

- Registrera den ursprungliga färgen, bedöm tändernas aktuella hälsa och kontrollera att patienten har realistiska förväntningar på slutresultatet.
- Provisoriska eller tillfälliga tandlagningar kan missfärgas under blekningen, medan

komposit- eller polykarbonatmaterial inte påverkas. Därför ska alla patienter med kompositlagningar informeras om att befintlig komposit kanske måste bytas ut, eftersom det endast är naturliga tänder som blir vitare.
- Vänta i två veckor efter blekningen med behandlingen av patienter som behöver en estetisk eller håftande lagning, då hinner färgen stabilisera sig. Alla lagningar ska vara intakta, eller väl förseglade med de korrekta tillfälliga materialen.

- Vi rekommenderar att tänderna borstas med tandkräm för känsliga tänder under två veckor före behandlingen och två veckor efteråt.
- Varna alltid patienten om att tänderna kan bli känsliga och att tandkötet kan bli irriterat under behandlingen. Den del av tandkötet

som kommer i kontakt med medlet kan bli rött eller vitt, men efter ett par dagar får det tillbaka sin normala färg igen.

- Rekommendera patienten att borsta bort överflödigt gel vid tandköttsgränsen, för att förebygga irriterationer på mjukvävnaderna, och att skölja munnen noga efter behandlingen.
- Se till att patienten sätter tillbaka locket på sprutan efter varje behandling.
- Nejmné 30 minut před zahájením provozu **KASSERING** får patienten inte äta, dricka eller röka.
- Instruera patienten om att avbryta behandlingen och omedelbart kontakta dig om det skulle uppstå några problem.
- Den slutgiltiga färgen kommer fram cirka två veckor efter att behandlingen har inletts. Efter behandlingen ska patienten komma tillbaka för en kontroll.

VARNINGAR

- Innehåller fluor.
- Innehåller vätesuperoxid.
- Undvik kontakt med ögonen.
- Förvaras utom räckhåll för barn.
- Använd inte på överkänsliga tänder.

- Ät, drick eller rök inte när du har de skräddarsydda blekningsbrickorna i munnen.
- Färligt att svälja.

INSTRUKCE PRO HLÍDÁNÍ DĚTI

- Om du svalt en större mängd (mer än 25 % av gelet i sprutan); drick genast vatten, tvinga inte fram kräkningar och kontakta läkare.
- Om det kommit gel i ögonen ska du dra upp ögonlocken, skölja ögat med vatten i minst 15 minuter och kontakta läkare.
- Om gel kommer på kläderna, huden eller i håret: ta av kläderna och skölj huden eller håret under rinnande vatten.

MÖJLIGA BIVERKNINGAR

Biverkningar som kan uppstå i samband med användning av Cavex Bite&White omfattar, men - Efter blekning inom tandvärden och/eller i är inte begränsade till:

- Känslighet

Vissa patienter upplever under behandlingen att tänderna blir känsligare för kyla, andra kan känna av en icke-specifik känslighet i tänder, tandkött, tunga, läppar eller hals. I allmänhet ska symtomen försvinna ett par dagar efter att behandlingen har avslutats. Behandlingen kan fortsättas med kortare, mindre frekventa användningar tills du har erhållit önskad blekningsnivå. Om obehagen kvarstår ska behandlingen avslutas.
- Irriterat tandkött
- Brickor som sträcker sig över tandkötet kan ge en mätlig till allvarlig irritation av mjukvävnad. Om brickorna passar bra:

kontrollera att patienten använder rätt mängd finger. på rätt sätt. Patienter kanske måste minska mängden gel på brickorna.

FÖRVARINGSREKOMMENDATION

- Förvaras svalt (<8° C) på en mörk och torr plats.
- Använd inte materialet efter det angivna bäst före-datumet.

STEG C= UNDERHÅLL: CAVEX BITE&WHITE EXSENSE

BESKRIVNING

Cavex Bite&White ExSense är ett vattenbaserat gel med mintarom, som innehåller hydroxiapatit och kaliumnitrat. Cavex Bite&White ExSense minskar känsligheten och gör tänderna vitare tack vare remineralisering med hydroxiapatit.

FÖRPACKNING

Tub 42 ml - 50 gram (räcker till cirka 20 behandlingar)

VIKTIGASTE INGREDIENSER I CAVEX BITE&WHITE EXSENSE:

Hydroxiapatit 2 %, kaliumnitrat 0,1 %

SAMMANSTÄLLNING

Aqua, hydrogenererat stärkelsehydrolysat (sorbitol), glycerin, erytritol, litiummagnesiumnatriumsilikat, hydroxiapatit, kaliumklorid, kaliumnitrat, fenoxetyanol, xanthangummi, tetranatriumpyrofosfat, vinsyra, mintarom, natriumsackarin.

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING

Biverkningar som kan uppstå i samband med användning av Cavex Bite&White omfattar, men - Efter professionell rengöring av tänderna
- Förebyggande och begränsning av känslighet

KONTRAIKATIONER

Använd inte Cavex Bite&White ExSense om du är allergisk mot mintarom eller mot någon annan av ingredienserna.

HANTERING

1. Förbered och rengör tänderna med tandborste och tandtråd.
2. Apilicace:

Utän bricka:

Tvätt händerna noga med tvål och vatten.
Vyzkoušejte si Cavex Bite&White ExSense v püčovní.

Anbringa gelet försiktigt på alla tandtytor, både de övre och de nedre.
Lämna gelet på tänderna i 10 minuter.
Spotta ut överflödigt gel och skölj inte munnen med vatten.

Med bricka:

Ut en smal remsa Cavex Bite&White ExSense över hela brickan. För in brickan i munnen och rotera den försiktigt år höger och vänster för att se till att gelet sprids över tänderna. Bit ihop försiktigt i brickan och låt gelet verka i 10 minuter. Ta ut brickan, spotta ut överflödigt gel och skölj inte munnen med vatten. Skölj brickan med kallt vatten.

3. Sätt alltid på locket på tuben omedelbart efter användningen.
4. För att uppnå bästa resultat ska du inte äta eller dricka något under minst 30 minuter efter behandlingen.
5. Använd produkten dagligen i 10 dagar eller enligt tandvårdspersonalens instruktioner.

VARNINGAR & INSTRUKTIONER FÖRSTA HJÄLPEN

Om det kommit gel i ögonen ska du skölja ögat med mycket vatten och kontakta läkare. Använd inte materialet efter det angivna bäst före-datumet.

FÖRVARINGSREKOMMENDATION

Förvaras svalt och torrt (frostfritt) och skyddat från direkt solljus.

Tillverkat av Cavex Holland BV

Vårt tekniska råd, antingen verbalt, skriftligt eller grundat på erfarenhet, har getts i god tro men utan garantier. Detta gäller också där äganderättsförhållanden för tredje part blir

Aktuální informace. Det befriar ej från skyldigheten att testa de produkter som tillhandahålls av oss avseende deras lämplighet för avsedda behandlingar och indikationer. Applikationen, användningen och hanteringen av produkterna ligger utanför vår kontroll och är helt och hållet ert ansvar. Skulle vi trots detta hållas ansvarsskyldiga begränsas ansvaret till värdet av det gods som levererats av oss och använts av er. Vi garanterar, naturligtvis, en jämn kvalitetitet på våra produkter inom ramarna för gällande leveransbestämmelser.

Cavex Bite&White ABC Master Kit : 3-adımlık Evde Beyazlatma sistemi

ADIM A= ETKİLİŞME(AKTÇVE ETME) CAVEX BÇTE&WHÇTE STAÇNELSS

AÇIKLAMA

Diş Ağartma Aktifleştirici & Leke Kaldırma Macunu. Dişlerdeki yüzey lekelerini ve plakları kaldırır. Ağızdaki pH'ini optimize ederek ağartma KLÇNÇK PROSEDÜR Tedavilerini artırır.

PAKETLEME

- Tüp 35ml - 50g
- Diş minesi / dentin için hafif aşındırıcıdır.
- Yüksek temizleme ve parlatma değerleri vardır.
- Diş ağartma tedavisinin hazırlığı olarak ağız pH'sini artırır.
- Düzenli kullanım için amaçlanmamıştır.

CAVEX BİTE&WHITE STAINLESS BÇLEŞENLERÇ

Aqua, Sorbitol, Hidratlı silikat, Glicerol, Eritol, Lityum magnezyum sodyum silikat, Poloksamer, Sodyum heksametofosfat, Selüloz gum, Ksantan gum, Fenoksi-etanol, Sodyum sakarin, Nane aroması, Limonene, CI 42090

ADIM B= AŞARTMA: CAVEX BÇTE&WHÇTE

AÇIKLAMA

Hidrojen peroksit Cavex Bite&White içindeki ağartıcıdır. Yeterince kararı bir ürün elde etmek için bu karabamit,(karbamid) peroksit olarak etkilmiştir. Karabamit (karbamid)peroksit hızlıca oksijen radikalleri ve su olarak ayrılır. Serbest radikaller ağartma süreci sırasında dişlerdeki çoğu renk (leke) kaynağı olan çifte karbon bağlarına yönelirler.

PAKETLEME

- Cavex Bite&White 3 ml şırıngalar

CAVEX BİTE&WHITE ACTIVE BÇLEŞENLER

- 16 % Karbamit Peroksit - %6 hidrojen peroksit ile eşittir.
- 0,2 % Potasyum nitrat desensitizeri
- 0,1 % Sodyum flüorit desensitizeri

BÇLEŞÇM

Karbamit Karbamid)peroksit, potasyum nitrat, sodyum flüorit, karbomer, glicerol, EDTA, potasyum hidroksit, nane yağı, su.

KULLANIM ENDÇKASYONLARI

Cavex Bite&White doğal dişin rengini azaltmak(ağartmak) için kullanılan diş ağartma UYARILAR jeleridir. Cavex Bite&White sadece bir diş uzmanı tarafından veya onun talimatı üzerinden dağıtılır. Herhangi bir ağartma prosedüründen önce uzman bir diş hekimine danışılması, bunun altında(yanı sıra) ağız veya sağlık sorunları

olmamasından emin olmak üzere tavsiye edilir.

CONTRA-ENDÇKASYONLAR

Aşağıdaki durumlarda bir doktora başvurmak tavsiye edilir:

- Hamile ve vazuşujici atmosfere
- Şu anda ciddi bir hastalık için tedavi görenler
- 18 let od narozenil

KLÇNÇK PROSEDÜR

- Başlangıç rengini kaydediniz, şimdiki diş sağlığını değerlendiriniz ve hastanın kesin sonuçlar hakkında gerçekçi beklentileri olmasını sağlayınız.
- Ağartma süreci sırasında kompozit (kompozit) veya polikarbonat malzemeleri etkilendenmen kalabilir fakat geçici veya kesin olmayan restorasyonların rengi bozulabilir. Bu nedenle kompozit(kompozit) restorasyon bulunan hastalara mevcut kompozitlerini

değiştirmesi gerektiği, zira ancak doğal dişlerin Cavex Bite&White kullanımı ile ilgili olabilecek

- yan etkiler aşağıdakileri içerir fakat bununla sınırlı değildir:
- Hassasiyet
- Bazı hastalar tedavi sırasında dişlerinin soğuga karşı daha fazla hassas olmasını yaşamayabilirler, diğer hastaların ise diş, dişeti, dil, dudak veya boğazlarında nonspesifik hassasiyetleri olabilir.
- Genel olarak bu tür belirtilerin tedaviye son verilmesinden sonra birkaç gün içinde kaybolması gerekir. İstenilen ağartma etkisi elde edilmeye kadar daha kısa, daha seyrek uygulamalarla tedaviye devam edilebilir. Rahatsızlıklar devam ettiğinde tedaviyi durdurunuz.
- Dişeti tahrişi Dişetine kadar uzanan kalıplar

- Yumuşak doku tahrişini engellenmek için hastaya, kalıpları fazladan doldurmasını, fazladan jelin dişetin çizgisinden silinmesini ve tedaviden sonra ağızını iyice durulamasını tavsiye ediniz.

- Hastanın her tedaviden sonra şırınga kapağının yerine takmasından(taktığından) emin olun.
- Her tedaviden sonra hasta en az 30 dakikalık bir süre hiçbir şey yiyip içmeyecek veya tütün manulleri de kullanmayacaktır.
- Herhangi bir sorun olduğunda tedaviye son vermesi ve sizinle hemen irtibata geçmesi konusunda hastaya talimat veriniz.
- Kesin renk tedavinin başlangıcından 2 hafta sonra elde edilmeye olacaktır. Tedaviden sonra bir izleme randevusu düzenlenmelidir.

- Flüorit içerir.
- Hidrojen Peroksit içerir.
- Gözle temas edilmesinden kaçınılmalıdır.
- Çocukların ulaşamayacak yerde saklayınız.
- Bilinen aşırı hassas dişlerin buna maruz

- kalmısından kaçınılmalıdır.
- Kişiyi uygun kalıplar dolu takılı kaldığı müddetçe hiçbir şey yemeyiniz, içecek almayınız veya sigara içmeyiniz.
- Yutulduğunda zararlıdır.

ÇLÇK YARDIM TALÇMATI

- Büyük bir miktar (şırıngadaki jelin %25'inden fazlası) yutulması durumunda hemen su içiniz, kusmayı tetiklemeyiniz ve doktora irtibata geçiniz.
- Jel göze geldiğinde göz kapaklarını ayrı tutunuz ve gözü en az 15 dakikalık bir süre akan suyla aralıksız durulayın ve bir de doktorla irtibata geçiniz.
- Giysi, deri veya saçla temas olduğunda bulamış giysiyi çıkartınız ve deri ya da saçı akan suyla durulayınız.

OLASI YAN ETKİLÇLERÇ

- Bazı hastalar tedavi sırasında dişlerinin soğuga karşı daha fazla hassas olmasını yaşamayabilirler, diğer hastaların ise diş, dişeti, dil, dudak veya boğazlarında nonspesifik hassasiyetleri olabilir.
- Genel olarak bu tür belirtilerin tedaviye son verilmesinden sonra birkaç gün içinde kaybolması gerekir. İstenilen ağartma etkisi elde edilmeye kadar daha kısa, daha seyrek uygulamalarla tedaviye devam edilebilir. Rahatsızlıklar devam ettiğinde tedaviyi durdurunuz.
- Dişeti tahrişi Dişetine kadar uzanan kalıplar

- haftten ciddiye kadar yumuşak doku tahrişine 1. Diş fırçası ve diş ipiği kullanarak dişi hazırlayınız neden olabilir. Kalıplar tam oturtulduğunda hastanın istenen miktarı gerekli şekilde uygulayıp uygulamadığını kontrol ediniz. Hastanın kalıplarına konulan jel miktarını azaltması gerekebilir.

SAKLAMA TAVSÇYESÇ

- Karanlık, kuru bir yerde soğutulmuş (<8°C) olarak saklayınız.
- Son kullanım tarihinden sonra materyali kullanmayınız.

ATMA

- Cihazı yerel atık yönetmeliğine uygun olarak atınız.

ADIM C= KONDÇSYONLAMA:

CAVEX BÇTE&WHÇTE EXSENSE

AÇIKLAMA

Cavex Bite&White ExSense hidroksiapatiti ve potasyum nitrat içeren nane aromalı su bazılı bir jeldir. Cavex Bite&White ExSense hassasiyeti kontrol ederek, hidroksiapatiti tekrar mineralleştirme ile diş beyazlığını artırır.

PAKETLEME

Tüp 42 ml - 50 gramı (yaklaşık 20 tedavi seansı) için yeterlidir)

CAVEX BİTE&WHITE EXSENSE ANA BÇLEŞENLERÇ:

Hidroksiapatit (hidroksiapatit)%2, Potasyum nitrat %0.1

BÇLEŞÇM

Aqua, Hidrojenlenmiş nişasta hidrolizat (Sorbitol), Glicerol, Eritrol, Lityum magnezyum

sodyum silikat, Hidroksiapatit, Potasyum klorit, Potasyum nitrat, Fenoksietanol, Ksantan gum, Tetrasodyum pirofosfat, Tartar asidi, Nane Aroması, Sodyum sakarin.

KULLANIM ENDÇKASYONLARI

- Muayenehanedeki ve/veya evdeki diş ağartmadan sonra
- Profesorka a üçtel se v enüjjetatüm
- Hassasiyetin önlenmesi ve kontrolü

CONTRA-ENDÇKASYONLARI

Nane aroması veya diğer bileşenlere karşı alerji olunması durumunda Cavex Bite&White ExSense'yi kullanmayınız.

KULLANMA PROSEDÜRÜ

1. Diş fırçası ve diş ipiği kullanarak dişi hazırlayınız ve temizleyiniz.
2. Uvidime se v budocnu:

Kalıpsız: (Plaksız)
Elli sabunla suyla iyice yıkayınız. Küçük bir miktar Cavex Bite&White ExSense'yi temiz bir parmağa koyunuz. (koyunuz)Üst ve alt dişlerin tüm yüzeylerine jeli kibarca (nazikçe) sürünüz. Jelin dişte 10 dakikalık bir süre kalmasını sağlayınız. Fazladan jeli tükürerek atınız ve ağızınızı suyla durulamayınız.

Kalıpla: (Plakla)
Tüm kalıba ince bir şerit Cavex Bite&White ExSense sürünüz. Kalibi yerine sokunuz ve jelin dişlerden yayılmasını sağlamak üzere kalibi sola sağa çeviriniz. Kalibi yavaşça isiriniz

ve jeli 10 dakikalık bir süre yerinde bırakınız. Kalibi kaldırmız, fazladan jeli tükürerek atınız ve ağızınızı suyla durulamayınız. Kalibi soğuk suyla durulayınız.

1. Kullanımdan hemen sonra tüpün ağızını kapakla kapatınız.
4. En iyi sonuçlar için uygulamadan sonra en az 30 dakika hiçbir şey yemeyiniz içmeyiniz.
3. Ürünü 10 gün boyunca her gün veya diş uzmanınızın verdiği talimatlara göre kullanınız.

UYARILAR & ÇLÇK YARDIM TALÇMATI

Gözle temas edilmesi halinde bol suyla durulayınız ve doktor yardımı isteyiniz. Maddeyi son kullanım tarihinden sonra kullanmayınız.

SAKLAMA TAVSÇYESÇ

Serin, kuru yerde (donma olmayan) ve doğrudan güneş ışığından korunmuş şekilde saklayınız.

Cavex Holland BV tarafından imal edilmiştir

Sözlü, yazılı veya denemelerle verdiğimiz teknik tavsiyelerle güvenle ancak garanti verilmenden yapılmıştır, ve bu aynı zamanda üçüncü kişilerin mal sahipliği haklarını da kapsar. Bu sizi belirtilen prosedür ve kullanımlar için tarafımızdan sağlanan ürünleri test etmek zorunluluğundan uzaklaştırır. Ürünlerin uygulanması, kullanımı ve prosedürleri bizim kontrolümüzün ötesindedir ve bu yüzden tamamen sizin sorumluluğunuzdur. Bu sorumluluğa rağmen belirtilen herhangi bir zarar bizim tarafımızdan verilen ve sizin tarafınızdan kullanılan malların değerleriyle ilimti olacaktır. Tabii ki, ürünlerimizin uygun kalitesini Genel Satış ve Dağıtım Koşullarımızın içinde sağlayacağız.

Cavex Bite&White ABC Master Kit : Σύστημα λεύκανσης στο σπίτι σε 3 βήματα

ΒΗΜΑ Α= ΕΝΕΡΓΟΠΟΤΗΣΗ: CAVEX BITE&WHITE STAINLESS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενεργοποιητής λεύκανσης δοντιών & πάστα για την αφαίρεση κηλίδων. Αφαιρεί επιφανειακές κηλίδες και πλάκα από τα δόντια. Ενισχύει τις θεραπείες λεύκανσης με τη βελτιστοποίηση του pH στο στόμα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Σωληνάριο 35ml - 50g
- Ελασφρά λεανικό για αδρανίνη / οδοντίη.
- Υψηλές τιμές καθαρισμού και σπλωσης.
- Αυξάνει το pH του στόματος ως προεργασία για λεύκανση δοντιών.
- Δεν προορίζεται για τακτική χρήση.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ CAVEX BITE&WHITE STAINLESS

Νερό, σορβιτόλη, ενυδατωμένη σίλικα, γλυκερίνη, ερυθρίνη, πυριτικό λίθιο-μαγνήσιο-νάτριο, πολυοξομυρίνη, εξαμεταφασφάτο νατρίου, κόμμι κυταρίνης, κόμμι ξανθό, φανοξυαιθανόλη, σακχαρίνη νατρίου, άρωμα μέντας, λεμονίνη, CI 42090

ΒΗΜΑ Β = ΛΕΥΚΑΝΣΗ: CAVEX BITE&WHITE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το υπεροξειδίο υδρογόνου είναι ο λευκαντικός παράγοντας στο Cavex Bite&White. Έχει προστεθει υπεροξειδίο καρβαμιδίου για την επίτευξη ενός επαρκώς σταθερού προϊόντος. Το υπεροξειδίο του καρβαμιδίου διασπάται γρήγορα σε ριζές οξυγόνου και νερό. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι ελεύθερες ριζές προσβάλλουν τις διπτανθρακικές ενώσεις, στις οποίες οφείλονται οι περισσότεροι αποχρωματισμοί (πλάκες) των δοντιών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Σύριγγες Cavex Bite&White 3 ml

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ CAVEX BITE&WHITE

- 16 % Υπεροξειδίο καρβαμιδίου - ισοδύναμο με 6 % υπεροξειδίο υδρογόνου
- 0,2 % Απευαισθητοποιητής νητρικού καλίου
- 0,1 % Απευαισθητοποιητής φθοριούχου νατρίου

ΣΥΝΘΕΣΗ

Υπεροξειδίο καρβαμιδίου, νητρικό κάλιο, φθοριούχο νάτριο, καρβομυρίνη, γλυκερίνη, EDTA, υπεροξειδίο καλίου, έλαιο μέντας, νερό.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το Cavex Bite&White είναι ένα λευκαντικό ζέλ

δοντιών που χρησιμοποιείται για να φωτίζει το χρώμα των φυσικών δοντιών. Το Cavex Bite&White πρέπει να χορηγείται μόνο με εντολή ειδικού. Πριν

από κάθε διαδικασία λεύκανσης, συνιστάται να συμβουλευτείτε έναν οδοντίατρο, προς αποφυγή σωματικών προβλημάτων ή προβλημάτων υγείας.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Συνιστάται να συμβουλευτείτε γιατρό οι παρακάτω κατηγορίες:

- Έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες
- Άτομα που υποβάλλονται αυτή τη στιγμή σε θεραπεία για σοβαρή ασθένεια
- Παιδιά κάτω των 18 ετών

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

- Καθορίστε την απόχρωση εκκίνησης, εκμητίστε την παρούσα υγεία της οδοντοστοιχίας και φροντίστε να είναι ρεαλιστικές οι προσδοκίες του ασθενούς για το τελικό αποτέλεσμα.
- Πρόχειρες ή προσωρινές αποκαταστάσεις μπορούν να αποχρωματιστούν κατά τη διαδικασία, ενώ σύνθετο ή πολυανθρακικό υλικό δεν θα επηρεαστεί. Γι' αυτό πρέπει να ενημερώνονται οι ασθενείς με σύνθετες αποκαταστάσεις ότι τα υφιστάμενα σύνθετα υλικά ενδέχεται να πρέπει να αντικατασταθούν, δεδομένου ότι μόνο τα φυσικά δόντια θα γίνουν.
- Όταν πρόκειται για ασθενείς που χρειάζονται

αισθητικές ή συγκολλητικές αποκαταστάσεις, πρέπει να περιμένετε 2 εβδομάδες μετά την τελευταία διαδικασία λεύκανσης ώστε να επιτρέψετε στο χρώμα να σταθεροποιηθεί. Όλες οι αποκαταστάσεις πρέπει να είναι ακέραιες ή καλά σφραγισμένες με κατάλληλα προσωρινά υλικά.

- Θα πρέπει να συνιστάται η χρήση οδοντόπαστας για ευαισθητά δόντια επί 2 εβδομάδες πριν από τη διαδικασία θεραπείας και 2 εβδομάδες μετά τη θεραπεία.
- Θα πρέπει πάντα να προετοιμοποιούνται οι ασθενείς για ευαισθησία δοντιών ή ερεθισμό ούλων κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Οι περιοχές των ούλων που έρχονται σε επαφή με το υλικό μπορούν να κοκκινίσουν ή να ασπρίσουν, αλλά θα ανακτήσουν το φυσιολογικό τους χρώμα ύστερα από μερικές ημέρες.
- Προς πρόληψη ερεθισμού του μαλακού ιστού, συμβουλευτέ τον ασθενή να μη γεμίσει υπερβολικά το διακάριο, να ακουτίζει το ζέλ του τυχόν περισσεύει από την άκρη του ούλου και να ξεπλύνει πολύ καλά το στόμα μετά τη θεραπεία.
- Βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής, ύστερα από κάθε θεραπεία, επαναποθετεί το κατάπι της σύριγγας.
- Ο ασθενής δεν θα πρέπει να τρώει, να πίνει ή να καπνίζει επί 30 λεπτά τουλάχιστον ύστερα από κάθε θεραπεία.
- Συμβουλευτέ τον ασθενή να σταματήσει τη θεραπεία και να έρθει αμέσως σε επαφή μαζί σας εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα.
- Η τελική απόχρωση θα επιτευχθεί περίπου 2

εβδομάδες μετά την έναρξη της θεραπείας. Μετά τη - Να απομακρύνετε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ακουστικά. παρακολούθησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΤΗΣΕΙΣ

- Περιέχει φθοριούχο άλας.
- Περιέχει υπεροξειδίο υδρογόνου.
- Να αποφεύγετε επαφή με τα μάτια.
- Να το κρατάτε μακριά από τα παιδιά.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε δόντια που ξέρετε πως είναι υπερευαίσθητα.
- Μη τρώτε, μη πίνετε και μη καπνίζετε ενόσω έχετε στο στόμα τα γεμάτα προσωπικά σας διακάρια.
- Εκπλύνετε σε περίπτωση κατάποσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

- Εάν καταπιείτε μια μεγάλη ποσότητα (περισσότερο Σωληνάριο 42 ml - 50 g (αρκετό για περίπου 20 από 25% του ζέλ στη σύριγγα), πιείτε αμέσως νερό, μην προσπαθήσετε να κάνετε εμετό και συμβουλευθείτε ένα γιατρό.
- Εάν πίνει ζέλ στα μάτια, κρατήστε ανοιχτά τα βλέφαρα και ξεπλύνετε το μάτι με τρεχούμενο νερό χωρίς διακοπή επί 15 τουλάχιστον, και ελάτε σε επαφή με ένα γιατρό.

- Σε περίπτωση επαφής με, επιδερμίδα ή μαλλιά, αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και ξεπλύνετε τη μαλλιά με τη μαλλιά με τρεχούμενο νερό.

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Παρενέργειες που μπορούν να συνδυαστούν με τη χρήση του Cavex Bite&White είναι μεταξύ άλλων οι ακόλουθες, όχι όμως αποκλειστικά:

- Ευαισθησία
Ορισμένοι ασθενείς ενδέχεται να έχουν κατά τη διάρκεια της θεραπείας αυξημένη ευαισθησία των δοντιών στο κρύο, ενώ άλλοι ενδέχεται να έχουν απροσδιάρητη ευαισθησία στα δόντια, τα ούλα, τη γλώσσα, τα χείλη ή το λαιμό τους. Κατά γενικό κανόνα, τα συμπτώματα θα εξαφανισθούν μέσα σε μερικές μέρες αφού διακοψετε τη θεραπεία. Η θεραπεία μπορεί να συνεχιστεί με συντομότερες, λιγότερο συχνές εφαρμογές ώσπου να επιτευχθεί το επιθυμητό λευκαντικό αποτέλεσμα. Εάν η ενόχληση επιμένει, τερματίστε τη θεραπεία.
- Ερεθισμός των ούλων
Διακάρια που εκτείνονται πάνω στα ούλα μπορούν να προκαλέσουν ήπιο μέχρι σοβαρό ερεθισμό του μαλακού.
- Εάν τα διακάρια εφαρμόζουν καλά, ελέγξτε αν ο ασθενής χρησιμοποιεί τη σωστή ποσότητα με το σωστό τρόπο. Ο ασθενής ενδέχεται να πρέπει να μειώσει την ποσότητα ζέλ στα διακάρια.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

- Διατηρείται κρύο (<8°C) σε σκοτεινό και στεγνό μέρος.
- Μη χρησιμοποιείτε το υλικό μετά την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Απομακρύνετε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ακουστικά.

ΒΗΜΑ C= ΧΡΗΣΗ ΚΩΝΙΣΤΙΟΝΕΡ: CAVEX BITE&WHITE EXSENSE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Cavex Bite&White ExSense είναι ένα ζέλ υδατικής βάσης με άρωμα μέντας, το οποίο περιέχει υδροξυαπατίτη και νητρικό κάλιο. Το Cavex Bite&White ExSense περιορίζει την ευαισθησία και αυξάνει τη λευκότητα των δοντιών χάρη στην αναμετάλλωση του υδροξυαπατίτη.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Υδροξυαπατίτης 2%, νητρικό κάλιο 0,1%

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ-ΚΑΕΙΔΙΑ ΤΟΥ CAVEX BITE&WHITE

Υδροξυαπατίτης 2%, νητρικό κάλιο 0,1%

ΣΥΝΘΕΣΗ

Νερό, υδρογονομένη υδρόλυση αμιούλου (σορβιτόλη), Διαπρεΐτα σε μέρος κρύο, στεγνό (χωρίς πάγο) γλυκερίνη, ερυθρίνη, πυριτικό λίθιο-μαγνήσιο-νάτριο, υδροξυαπατίτης, χλωριούχο κάλιο, νητρικό κάλιο, φανοξυαιθανόλη, κόμμι, πυροφωσφορικό τετρανάτριο, ταρταρικό οξύ, άρωμα Κατασκευάζεται από την Cavex Holland BV μέντας, σακχαρίνη νατρίου.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Ύστερα από λεύκανση δοντιών στο γραφείο και/ή στο σπίτι
- Ύστερα από επαγγελματικό καθαρισμό δοντιών
- Πρόληψη και περιορισμός ευαισθησίας

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Μη χρησιμοποιείτε το Cavex Bite&White ExSense σε περιπτώσεις αλλεργίας στο άρωμα μέντας ή σε κάποιο άλλο από τα συστατικά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

1. Προετοιμάστε και καθαρίστε τα δόντια χρησιμοποιώντας οδοντόβουρτα και οδοντικό νήμα.
2. Εφαρμόστε:

Χωρίς διακάριο: Πλύνετε τα χέρια σας πολύ καλά με σαπούνι και νερό. Βάλτε μια μικρή ποσότητα Cavex Bite&White ExSense σε ένα καθαρό δάκτυλο. Βάλτε απαλά το ζέλ σε όλες τις επιφάνειες της επάνω και της κάτω οδοντοστοιχίας. Αφήστε το ζέλ στα δόντια επί 10. Φτύστε όσο ζέλ ενδεχομένως περισσεύει και μη ξεπλύνετε το στόμα σας με νερό.

Με διακάριο:

Βάλτε μια γραμμική Cavex Bite&White ExSense από τη μια ως την άλλη άκρη του διακαρίου. Εισαγάγετε το διακάριο και γυρίστε το ήρεμα αριστερά και δεξιά ώστε να μοιραστεί καλά το ζέλ στα δόντια.

Δαγκώστε απαλά το διακάριο και αφήστε το ζέλ να ενεργήσει επί 10 λεπτά. Βγάλτε το διακάριο, φτύστε όσο ζέλ ενδεχομένως περισσεύει και μη ξεπλύνετε

το στόμα σας με νερό. Ξεπλύνετε το διακάριο με κρύο νερό.

3. Να κλείνετε πάντα το σωληνάριο με το κατάπι αμέσως μετά τη χρήση.
4. Για να έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα, μη πίνετε και μη τρώτε επί 30 λεπτά τουλάχιστον μετά την εφαρμογή.
5. Χρησιμοποιήστε το προϊόν καθημερινά επί 10 ημέρες, ή ακολουθήστε τις οδηγίες του οδοντίατρου σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΤΗΣΕΙΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε πολύ καλά με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια. Μη χρησιμοποιείτε το υλικό μετά την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Νερό, υδρογονομένη υδρόλυση αμιούλου (σορβιτόλη), Διαπρεΐτα σε μέρος κρύο, στεγνό (χωρίς πάγο) και προστατευμένο από απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως.

Οι τεχνικές μας συμβουλές, είτε προφορικές, γραπτές είτε μέσω δοκιμών, παρέχονται καλή τη πίστη χωρίς εγγύηση, και αυτό ισχύει επίσης για τα αποκλειστικά δικαιώματα τριτών. Δεν αναρούν την υποχρέωση σας για δοκιμή των προϊόντων τα οποία προμηθεύεται από εμάς, σε ό,τι αφορά την καταλληλότητα τους για τις διαδικασίες και χρήσεις για τις οποίες προορίζονται.

Η εφαρμογή, χρήση και επεξεργασία των προϊόντων είναι πέραν της δικής μας δικαιοδοσίας, και κατά συνέπεια αποτελεί αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Εάν παρόλη την ευθύνη αυτή διαπιστωθεί υπαπόληξη για τυχόν βλάβη, αυτή περιορίζεται μέχρι ποσού ίσου με την αξία των προϊόντων τα οποία προμηθεύτηκε από εμάς, και τα οποία εσείς χρησιμοποιείτε. Φυσικά προσφέρουμε σταθερή ποιότητα προϊόντων στα πλαίσια των δικών μας Γενικών Όρων Πωλήσεων και Παράδοσης.

步驟A=清潔: Cavex Bite&White Stain-Méné

產品說明

本產品為牙齒美白催化劑和清潔劑，能去除牙齒表面的污漬和牙菌斑，藉由調整至適當的pH值強化美白的效果。
- 對（牙齒）的琺瑯質/牙本質有溫和的研磨效果

- 高度清潔和拋光作用
- 作為牙齒美白的預先處理，調整口腔的pH值
- 不適合經常性的使用

包裝

軟管35毫升 - 50克

Cavex Bite&White StainLess 的

組成成分
水 (Aqua), 山梨（糖）醇(Sorbitol), 矽酸 (hydratovaný oxid křemičitý), 甘油 (glycerin), 羧甲基纖維素
赤藻糖醇(Erythritol, 矽酸鈉鎂鹽 (křemičitan hořečnato-sodný), 泊洛沙姆(Poloxamer), 六聚偏磷酸 (hexametáfosforečnan sodný), 羧甲基纖維素

(celulózová guma), 黃原膠 (xanthanová guma) (牙醫的臨床步驟 (指南)
- 苯氧乙醇(fenoxyethanol), 糖精鈉 (sacharin), 薄荷香 (aroma máty), 檸檬油精 (limonen), FD&C
色料 藍色一號 (CI 42090)

步驟B = 美白: Cavex Bite&White

產品說明

Cavex Bite&White中的過氧化氫，具有美白功能。為了讓產品具有高度穩定性，過氧化氫以過氧化脲的形式加入本品。過氧化脲能在氧基和水中很快溶解。在美白過程中，游離基會攻擊雙碳鍵 (dvojité uhlíkové vazby), 而雙碳鍵正是牙齒上大多數顏色（污斑）的根源。

包裝

Cavex Bite&White 3 毫升的填充料管

Cavex Bite&White的美白成分

- 16% 過氧化脲 - 相當於6% 過氧化氫
- 0.2% 硝酸鉀去敏劑
- 0.1% 氟化鈉去敏劑

組成成分
過氧化脲 (peroxid karbamidu), 硝酸鉀(Dusičnan draselný), 氟化鈉 (Fluorid sodný), 卡波姆 (高分子膠) (karbomer), 甘油(glycerin), 乙二胺四乙酸(EDTA), 氫氧化鉀(draslík hydroxid), 薄荷油 (mátový olej), 水(Voda)

使用說明

Cavex Bite&White是一種凝膠狀的牙齒美白劑，用於把自然牙變亮變白。
- Cavex Bite&White美白劑需經由專業牙醫指示或經由專業牙醫的處方箋購買。為確保不會對口腔或身體健康的任何疑慮，建議您在開始美白之前，請先諮詢專業的牙醫師。

禁忌

- 下列人員不宜使用本品，如要使用，建議諮詢牙醫師：
- 懷孕和哺乳的婦女
- 因嚴重疾病而正在接受治療的人
- 18歲以下的青少年

緊急處置

- 如有大量（一管的25%以上）本品被吞下，請立即喝大量的水，不要催吐，並保持牙齒的潔白。
- 如有膠狀美白劑進入眼睛，撥開眼瞼，包裝不間斷地用流動水沖洗眼睛至少15分鐘，並聯繫牙醫師。
- 脫護敏凝膠的關鍵成分
- 掉被污染的衣服，並用流動水沖洗皮膚 羧磷灰石2%，硝酸鉀0.1%或毛髮。

齒修復物的使用者，現存的複合修復物可能出現的副作用
可能重新製作，因為只有自然牙齒能與使用Cavex Bite&White相關，可能會美白，修復物無法藉由使用美白劑劑達 出現下列或其它副作用：
- 到美白效果。

- 需要美觀性修復物或黏著修復物的使用 - 敏感者，在最近一次美白實施後，要等兩個星期，讓顏色穩定下來，再製作美觀性的修復物。
- 美白實施之前後的兩個星期，應該建議病人使用去敏感性的牙膏。
- 警告病人，在美白實施期間敏感性牙齒可能會有酸軟現象的，牙齦可能會些微疼痛感。美白劑直接接觸到牙齦部位可能會變紅或變白，但是幾天以後就可恢復正常顏色。
- 為了避免軟組織受刺激疼痛，應該建議 - 牙齦疼痛病人：避免把美白牙托填充得過滿，在

實施美白後擦掉殘留在牙齦邊緣上的美白劑，並徹底漱口。
- 必須提醒使用者，每次美白之後，要把美白劑的蓋子重新蓋好。
- 使用者每次美白後至少30分鐘，不要進食、飲水或吸菸。
- 使用過程中，如果有任何問題，立即停 儲存建議
- 止美白並與醫師聯繫。
- 開始美白後大約兩個星期達最好的美白效果（最終的顏色）。美白結束後應該安 - 有效期後，請勿使用。排回診追蹤。

- 本品含有氟化物
- 本品含有過氧化氫
- 避免與眼睛接觸
- 保存在兒童無法觸及之範圍
- 已知牙齒過敏的人不得使用
- 佩戴已填充的與牙齒吻合配製的美白牙托，不得進食、飲水或吸菸
- 如果吞嚥，有害健康。

聯繫醫師。

- 如有膠狀美白劑進入眼睛，撥開眼瞼，包裝不間斷地用流動水沖洗眼睛至少15分鐘，並聯繫牙醫師。

聯繫醫師。

- 如有本品接觸到衣物、皮膚或毛髮，脫 護敏凝膠的關鍵成分
- 掉被污染的衣服，並用流動水沖洗皮膚 羧磷灰石2%，硝酸鉀0.1%或毛髮。

組成成分

水，氫化葡萄糖漿（山梨糖醇），甘油，赤藻糖醇，矽酸鈉鎂鹽，羧磷灰石，氧化鉀，硝酸鉀，苯氧乙醇，黃原膠，磷酸二鈉，酒石酸，薄荷香，糖精鈉

在美白期間，有的使用者可能會有牙齒

- 對冷、涼越來越敏感，而有的使用者會 適用範圍
在牙齒、牙齦、舌頭、嘴唇或喉嚨上有 - 在辦公室和/或在家美白牙齒之後某種不特定的敏感。一般來說，這樣的 - 專業（牙醫師）清潔牙齒之後症狀會在美白停止後幾天之內消失。美 - 預防和控制敏感
白可以繼續進行，但要縮短美白劑的施用時間、減少施用頻率，直到達到預想 禁忌
的美白效果。如果上述不適持續存在，如果對薄荷香或任何其他成分過敏，請則應該中斷美白。

操作程序

1. 用牙刷和牙線清潔牙齒

微或嚴重的軟組織疼痛。
如果美白牙托戴入正確無誤，應該檢查
使用者是否施用了適當的量，方法是否 未使用牙托：
得當。也許使用者需要減少注入美白牙 用牙水和香皂徹底清潔雙手。取出少量的
托的美白劑量。 牙齒護敏凝膠緩慢塗抹至所有上下牙齒表面
。讓護敏凝膠停留於牙齒表面10分鐘
後將殘留於牙齒上的護敏凝膠吐出，並以

- 於陰暗處、乾燥處儲存，保持冷卻（低 清水漱口。於
8°C ）。
- 有效期後，請勿使用。排回診

用後處置

- 使用後，按照當地的廢棄物處理規處 動牙托，使護敏凝膠均勻的分佈於牙齒
置剩餘產品。

步驟C = 護敏: Cavex Bite&White ExSense 產品說明

Cavex Bite & White ExSense - 牙齒護敏凝膠，是一種含羧基磷灰石 (hydroxyapatit) 和硝酸鉀 (dusičnan draselný) 成

分的薄荷香味水基凝膠。藉由羧基磷灰石 (hydroxyapatit) 的再礦化作用，此
牙齒護敏凝膠能夠減輕牙齒的敏感度，嚥，請立即喝大量的水，不要催吐，並保持牙齒的潔白。

軟管 42毫升 - 50克（使用大約20次）

組成成分

水，氫化葡萄糖漿（山梨糖醇），甘油，赤藻糖醇，矽酸鈉鎂鹽，羧磷灰石，氧化鉀，硝酸鉀，苯氧乙醇，黃原膠，磷酸二鈉，酒石酸，薄荷香，糖精鈉

2. 實際應用:

把牙托放入口中，並輕輕地左右移
表面。然後輕輕地咬住牙托10分鐘。然後取出牙托，將可能殘留的護敏凝膠吐出，並用清水漱口。使用冷水清洗牙托。
。讓護敏凝膠停留於牙齒表面10分鐘
後將殘留於牙齒上的護敏凝膠吐出，並以

使用牙托：
把少量的牙齒護敏凝膠塗抹在整個牙托上
。把牙托放入口中，並輕輕地左右移
表面。然後輕輕地咬住牙托10分鐘。然後取出牙托，將可能殘留的護敏凝膠吐出，並用清水漱口。使用冷水清洗牙托。
。

3. 每次使用後請立即將護敏凝膠瓶蓋扭緊。
4. 為達到最佳效果，使用後30分鐘內不

要飲水或進食。
5. 每天使用本品，連續使用10天，或遵照您專業牙醫師的指示。警告和急救指南

如不慎眼睛接觸本品，用大量的清水徹底清洗，並尋求醫師協助。有效期後，請勿使用本品。

儲存建議
存放於涼爽、乾燥（無冷凍）處，避免陽光直射。

製造商Cavex Holland 有限公司

本份文件中提及的技術性建議，不論是口頭上、書面上或者通過試驗，雖都經過確認但並非百分之百。因此您有義務在使用前測試我們產品。
應用，用途及處理產品不是我們所能控制的，因此，這完全是您自己的責任。我們僅負責產品的損壞責任，而使用中出現的責任則要由您來承擔。當然，我們提供的產品品質保障包含銷售和運送。

Cavex Bite&White ABC 마스터 키트: 단계 제가 미백 시스템

A 단계= 활성화 (aktivace): Cavex Bite&White StainLess

설명
치아 미백 활성제 & 얼룩 제거 페이스트. 치 타면 것이어야 한다. 여타의 미백 절차 여타의 미백 절차

아 표면의 얼룩 및 치태제거. 구강 내 pH 농도 최적화를 통한 미백처리 개선.

포장
35ml 튜브 - 50g

- 법랑질상아질 약간 연마
- 높은 클리닝 및 연삭 연마 효과
- 치아미백을 위한 사전처리 차원에서 구강 - pH를 상승시킴
- 일상적인 잦은 사용®을 위한 제품에 해당

되지 않음
CAVEX BITE&WHITE STAINLESS 합

유성분
정제수, 소르비톨, 수화 실리카, 글리세린, 에 트리올, 리튬 마그네슘 규산나트륨, 폴록사 머, 헥사메타인산 나트륨, 셀룰로오스
겔, 크산탄 겔, 페복시메탄올, 사카린 나트륨, 민트 아로마, 리모넨, CI 42090

B 단계= 미백 (Rozjasnit): Cavex Bite&White

설명
과산화수소®, Cavex Bite&White 함유 된 미백제이다. 충분한 제품 안정성 확보를 위해 과산화수소®, 카바마이드 퍼옥사이드 형태로 첨가되었다. 카바마이드 퍼옥사이드®, 빠르게 활성산소와 물로 분해된다. 미백이 진행되®, 활성산소®, 치 변색(얼룩)의 주범인 탄소 이종결합물을 공격한다.

포장
- Cavex Bite&White 3ml 주사기

CAVEX BITE&WHITE 주성분
- 16% 카바마이드 퍼옥사이드 - 과산화 6%에 해당
- 0.2% 질산 칼륨 제각각제
- 0.1% 플루오르화나트륨 제각각제

함유성분
카바마이드 퍼옥사이드, 질산칼륨, 플루오르화 나트륨, 카보머, 글리세린, EDTA, 수산

화칼륨, 페퍼민트오일, 물, 사

®목적
Cavex Bite&White®, 자연치아의 색상을 밝게 하®, 데 사®하®, 치아 미백 겔이다. Cavex Bite&White®, 반드시 치과전 문 의에 의해 제공된 것이거나®, 지시.

를 밝기 전에, 잠재적 구강®, 건강 문제가 없도록 자격이 갖추어진 치과의사와 상담 권장한다.

금기® 사®금지
아래의 경우 의사와의 상담을 권장한다:

- 임신부 및 모유 수유여성
- 최근 심한 질병 치료를 받은 사람
- 18세 미만의 미성년자
- 임상절차
- 출발®처를 색상을 기록하고, 현재의 치아 건강상태를 점검하며, 최종 결과에 대한 환자의 기대치가 현실적인지를 확인 한다.

- 잠정적 일시적 수복물은 미백처리과정에서 변색될 수 있다.반면, 합성물®은 콤포지트이나 폴리카보네이트 제제®, 아무런 영향을 받지 않는다. 따라서 합성수복물

® 콤포지트를 사®하®, 환자에게®, 자연치아 만이 미백이 가능하다. 것을 일기과 기존 합성수복물® 콤포지트의 교체 필요-의복 할 수도 있다고 설명해야 한다.

- 미식적® 심미적®, 접착 수복을 필요로 하®, 환자®, 최종 미백처치를 마친 후 발생 가능한 부작용® 색상이 안정될때까지 2 주를 기다려야 Cavex Bite&White 사®하면 다음과 같 한다. 모든 수복물은 온전한 상태로 유지 중세 등이 나타날 수 있다. 되거나®, 적절한 임시제제로 잘 봉하

한다.
- 처리 치료가 시작되기 2주 전부터 처치가 종료되고 나서 2주 후까지 과민증 완화 화학약을 사®해야 한다고 권하도록 한다.

- 처치기간 중에®, 치아과민해지거나 잇몸® 잇몸이 쉽게 자극 받을 수도 있다. 것을 환자에게 항상 인지시키®, 인지 시키도록 한다. 잇몸의 접촉 부위®, 적색®, 흰색으로 변할 수 있지만, 며칠 이 경과하면 원래 색으로 복구된다.

- 연조직의 자극을 피하기 위해, 제제를 트레이이®에 과다하게 묻히®, 것을 삼가 할 것, 잇몸 경계에 과다하게 묻은 겔을 닦아낼 것, 처치 후®, 입을 구석구석 잘 헹글 것을 환자에게 주지시킨다.

- 매번 처치가 끝날 때마다, 환자®, 주사기 캡을 반드시 교체해야 한다고 확실시 한다.

- 매번 처치가 끝나고 나면 환자®, 적어도 30분 동안 식음과 흡연을 삼가 하여야 한다.

- 문제 발생시®, 즉시 처치를 중단하고 의사 상담을 받아야 한다고 환자에게 주지시킨다.
- 처치 개시 후 약 2주가 경과되면 최종 색상이 얼어질 것이다. 처치 후®, 추후

상담 약속을 잡도록 한다.

경고

- 불소 함유
- 과산화수소 함유
- 눈과의 접촉을 피한다
- 어린이 손이 닿지 않®, 곳에 보관한다
- 과민한 치아와의 접촉을 피한다
- 제제가 담긴 맞춤형 트레이를 착®하고 있®, 동안에®, 식음 및 흡연을 삼가 한다
- 건강에 해로우므로 삼키면 안된다

응급처치법

- 다®를 삼킨 경우 (주사기 내의 겔 25% 이상), 즉시 물을 마실 것이며, 억지로 토 포장 해내려고 유도하지 말고 의사와 상담하도록 한다.
- 눈 안에 겔이 들어간 경우, 손으로 눈꺼풀을 벌려 흐르®, 물에 적어도 15분 이상 CAVEX BITE&WHITE EXSENSE 주성분: 계속 씻어낸 후 의사와 상담하도록 한다. 수산화인회석®, 질산칼륨 0.1%, 피부, 머리카락과의 접촉이 생길 경우, 오염된 의복을 제거하고 피부나 머리카락 함유성분

정제수, 수산화 전분 가수분해물 (소르비톨), 글리세린, 에 트리올, 리튬 마그네슘 규산나트륨, 수산화인회석, 연화칼륨, 질산칼륨, 페복시메탄올, 크산탄 겔, 피로인산 사나트륨, 타르타르산, 민트 아로마, 사

카린 나트륨.
- 과민증
처치가 진행 중일 때에 치아가 유독 처가 것에 과민반응을 보인다고 하®, 환자들 사®목적 이 있®, 하면, 치아, 잇몸®, 혀, 입술 - 오피소 및®, 가정에서의 치아미백 후

®, 식도에 불특정 예민 반응이 있다고 하 사®®, 환자들도 있다. 일반적으로 중세®, 처치 - 전문적 치아 클리닝 후 사® 중로 후 며칠 이내에 사라져야 한다. 처치 ® 원하®, 미백효과가 얼어질 때까지 적® 시간과 빈도를 줄여 지속할 수 있다. 하지만 불편한 중세가 지속될 경우, 처치를 중단하도록 한다.

- 자극
잇몸까지 연결된 트레이®, 연조직을 다 소®, 심하게 자극할 수 있다. 트레이가 치아에 적절히 잘 맞®, 경우, 환자가 적당®을 적절한 방식으로 적® 하®, 지를 점검하도록 한다. 환자®, 자신의 트레이에 사® 하®, 겔의 양을 감소시.

켜야 할 수도 있다.

보관방법

- 어둡고 건조한 곳에 냉장 보관 (<8°C) 한 표면에 부드럽게 겔을 바른 다. 치아에 바른 겔이 약 10분 동안 작®하도록 둔다. 남은 초과 겔을 뱉어낸다. 물로 입을 헹구
- 유효기간이 경과한 제제®, 사®하지 않®다

폐기처리

- 기기®, 현지 폐기 관련 법규에 따라 폐기 이를 처리한다.

C 단계= 조절 (Stav): Cavex Bite&White ExSense

설명
Cavex Bite&White ExSense®, 수산화인회 질산칼륨을 함유한 민트 향의 수®성 기반 겔이다. Cavex Bite&White ExSense®, 수산화인회석 재광화를 통해 과민증을 제거하고 치아 미백을 개선해준다.

42 ml 튜브 - 50그램 (약 20회 처치에 충분)

정제수, 수산화 전분 가수분해물 (소르비톨), 글리세린, 에 트리올, 리튬 마그네슘 규산나트륨, 수산화인회석, 연화칼륨, 질산칼륨, 페복시메탄올, 크산탄 겔, 피로인산 사나트륨, 타르타르산, 민트 아로마, 사

카린 나트륨.
- 과민증 예방 및 제어

금기® 사®금지
민트 아로마나 기타 성분에 알레르기 중세 가

있®, 경우 Cavex Bite&White ExSense 를 사®하지 않®다.

취차

1. 첫술과 치실을 사®해 치아를 청결히 하여 사전 준비한다.
2. 적®:

트레이 비사®사:

물로 구석구석 씻®, 청결한 손가락 위소®의 Cavex Bite&White ExSense를 묻힌다. 윗니와 아랫니 전체

에 부드럽게 겔을 바른 다. 치아에 바른 겔이 약 10분 동안 작®하도록 둔다. 남은 초과 겔을 뱉어낸다. 물로 입을 헹구

Cavex Bite&White ExSense를 전체 트레이 따라 얇고 길게 묻힌다. 트레이를 삽입 후 겔이 치아에 고루 분포되도록 트레이를 부드럽게 좌우로 돌려준다. 가법제 트레이를 물고 약 10분 동안 겔이 작®하도록 그대로 둔다. 트레이를 제거하고, 남은 초과 겔을 뱉어낸다. 물로 입을 헹구지 않®, 다. 찬물로 트레이를 행군다.

3. 사® 후에®, 항시 튜브 캡을 곧바로 닫아 놓®, 다.
4. 최선의 결과를 얻기 위해, 적® 후에®, 적어도 약 30분 동안 식음을 삼가한다.
5. 제품은 얼음 동안 매일 사®하거나®, 치과 전문의의 지시에 따라 사®한다.

경고 & 응급처치 방법
눈과 접촉한 경우, 다®의 물로 완전히 씻어낸 후 의료진의 도움을 구한다. 유효기간이 경과한 제제®, 사®하지 않®, 다.

보관방법
직사광선이 들지 않®, 서늘하고 건조한 (서리가 생기지 않®,) 장소에 보관한다.

Cavex Holland (제조

당사의 기술적 조언은, 구두로 한 것이든 서면으로 한 것이든,®, 시험적인 것이든 관계없이, 선의 의도로 제공된 것으로 보 중에®, 해당되지 않습니다. 이®, 소 소유 권이 제삼자에게 귀속된 경우에도 해당.

됩니다. 당사의 제품이 목적하®, 사® ® 도에 적합한 지를 시험할 의무®, 귀하께 있습니다. 제품의 적®, 사®, 수, 취급하®, 데 있어 서의 책임은 당사의 관할영역을 벗어나므로, 이후 사®에 따른 책임은 귀하께 전적으로 있습니다. 이러한 전제조건 에도 불구하고 손해가 발생할 경우, 당사의 책임은 당사 가 제공한 제품 중 귀하가 사®한 제품의 값에 국한됩니다. 당사가 공급 하®, 제품은 당사 의 <판매 및 납품에 대한 일반 약관>을 준수 하®, 일정한 품질을 유지 할 것입니다.

Cavex Bite&WhiteABC-Masterkit

كافيكس بايت أند وايت إيه بي سي -الصدوق
الأساسي: نظام تبيض الأسنان في المنزل في ثلاثة خطوات

أ الخطوة=التفعيل: StainLessCavexBite&White

كافيكس بايت أند وايت ستيليس

الوصف
منظف ومعجون تبيض اسنان لزالة البقع. يزيل البقع السطحية والطبقة الجيرية من
الأسنان. يعمل على تقنية
علاج التبييض بواسطة زيادة نسبة الفوسفاتيدهدروجينية

التمية
أنبوب 53 مل 05 -جم
- كسط خفيف لمياه/تاج الأسنان.
- درجة عالية من التنظيف والتلميع.
- يزيد من نسبة القوة الهيدروجينية في الفم كعلاج تعديدي لعلمة تبيض الأسنان.
- غير مخصص للاستخدام المنتظم.

مكوناتStainLessCavex BITE&WHITEكافيكس

بايت أند وايت ستيليس
ماء سورينول، أكسيد السيليكون، جليسرين، إيزيثيلالبيوتيسيليك،المونوديوالمغنيسي

وم، بولوكسامير، هيكسانايفوسفاتالسيوم، مينالاسيلولالكروليكسيل،
صفقاتراتان، فيوتراتانول، سكارين الصوديوم، رائحة النعناع، ليمونين، CI 42090

الخطوة ب: التبييضCavexBite&White:كافيكس بايت أند وايت
الوصف
يعمل بروكسيدالهيدروجينكامل تبيض في
CavexBite&Whiteكافيكس بايت أندت.

و يتم إضافته في شكل بروكسيدالكاراميد لضمان ثبات المنتج بالفقر الكافي. و
يؤاميدسرعافعالجذور الحرة للكسجين

وعو وأتاععمليةالتبييضفوالجذورالبيروكسيدالمعجمهاجم
قمركانالكربونذاتالاربطالمزروجة،والتي عادة ما تكونالمصدر
الاسييفيرلوالأسنان.

التمية
-3 حقن - 3 من مل CavexBite&White
كافيكسبايتوايت

المواد المنشطة في CavexBITE&WHITEكافيكس بايت أند وايت
71%؛ بروكسيدالكاراميد -أي ما يعادل 7% من بروكسيدالهيدروجين
2-؛ تراتالبيوتيسيوم - 0-؛ فلوريدالصوديوم -
عامل منزل للتلميع

BITE&WHITEمكوناتCavexكافيكس بايت أند وايت
بروكسيدالكاراميد، تراتالبيوتيسيوم، فلوريدالصوديوم،
كربومير (عامل مستحلب)، جليسرين، رباعي حمض الخلل (EDTA)،
هيدروكسيدالبيوتيسيوم، زيت النعناع. e.

تعليمات الاستخدام

كافيكس بايت أند وايت هو جل تبيض الأسنان. حيث يعمل على تبيض لون الأسنان
الطبيعية. ولا يجوز صرف كافيكس بايت أند وايت إلا بروثقة طيبة من طبيب الأسنان .
ويصح باستخدامه طبيب الأسنان قبل بدء أي علاج للتبييض وذلك لتجنب أي مشاكل
صحية أو مشاكل في الفم.

موانع الاستعمال

يصح باستخدامه الطبيب في الحالات التالية للنساء :- الحوامل
والمرضعات؛
- الأشخاص الخاضعون للعلاج من مرض خطير؛ -الأطفال الذين
تقل أعمارهم عن عاماً 81

الإجراءات العلاجية

- سجل لون الأسنان في البداية، وقم بتقييمالاصحة الحاليةللأسنان و
تأكد من أن توقعات المريض واقعيةفيما يتعلق بالنتيجة النهائية
- قد يغير لون الترميمات المؤقتة للأسنان أثناء عملية التبييض. في حين لن تآثرالمواد
المركبة أو مادة

الويلي كربونا، ولذا ينبغي توضيح المرض الذي لديهم الأثر الجانبية الصارة المحتملة
ترميمات من الموادالمركبةبأنهم قد يحتاجوا لاستبدال تشمل الأثار الجانبية الناتجةعن استخدام كافيكس المواد المركبة الموجودة، نظراً لأن الأسنان الطبيعية بايت أند
وايت على الأمورالتالي ذكرها، مع التنويه بأنها
فقط هي التي ستصبح أكثر

- عليك الانتظار في حالة المرض الذي يحتاجون ترميمات تجعل أو ترميمات
لاصقة و ذلك لمدة أسبوعين بعد آخر علاج تبيض لكي يتمكن اللون من
الاستقرار.ويجب أن تكون جميع الترميمات سليمة أو مغطاه بإحكام بالمواد
المؤقتة، الصحيحة

باستخدام معجون الأسنان الخاص بالأسنان الحساسة لمدة أسبوعين قبل
العلاج ولمدة أسبوعين بعده

عليك دائماً إبلاغ المريض في حالة حساسية الأسنان أو الهاب اللثة أثناء ج قد
تغير لون اللثة التي تلبس العادة إلى اللون الأحمر أو الأبيض، إلا أنها
ستعود إلى لونها الطبيعي بعد بضعة أيام.

-لتجنب تهيج الأسجة اللبية، ينبغي أن تتجنب المريض ألا يفرط في ملء صنية التبييض،
و أن يقوم بإزالةالزائدة من الجل من على حافة اللثة و أن يقوم بشطف الفم
جيداً بعد العلاج
- قد يلف انتباه المريض إلى ضرورة وضع الفمغطاءأخرى على الحقنة بعد
كل علاج

- لا يسمح للمريض بتناول الطعام أو الشراب أو التدخين لمدة 03دقيقة
على الأقل بعد كل ج
- قد يلف انتباه المريض بضرورة العلاج والإلتزام بك على الفور
في حالة ظهور مشكلة
- سيظهر اللون النهائي بعد أسبوعين تقريباً من بدء

العلاج.ويجب بعد العلاج عقد موعد للاستشارة و
المتابعة.

تحذيرات

- يحتوي المنتج على فلوريد
- يحتوي المنتج على بروكسيد الهيدروجين - تجنب ملامسة العينين.
- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
- لا يستخدم للأسنان الحساسة للغاية.
- الابتعاد عن تناول الطعام و الشراب و التدخين عندما تكون صواني التبييض
التي تم صنعها حسبالمعاسداخل الفم
- صابر عنده

تعليمات الإسعافات الأولية

في حالة ابتلاع كمية كبيرة من الجل أكثر من 52% من كمية الجل الموجود
في (الحقنة) اشرب ماء على الفور، لا تجرب تفكلا على التقيؤ و قم باستشارة
الطبيب.

- إذا دخل الجل في العين:رفق : الغشغش لغشغ العين، واشطف العين بالماء
بدون توقف لمدة 15دقيقة متواصلة على الأقل و قم باستشارة الطبيب.
- في حالة ملامسة الجلد أوالشراب أو العلامس : اقع الملابس التي تلوئت
واشطف الجلد أو الشراب بماء الصبور الجاري.

التخلص من المنتج
تخلص من المنتج طبقاً للوائح والقواعد المحلية الخاصة و قم بلغها في اتجاه اليسار و اليمين، حتى يتم توزيع
بالتخلص من ت.

الخطوة ExSenseCavex :ج: التلطيف

كافيكسBITE&WHITE بايت أند وايتكافيكس الوصف

ExSenseCavex BITE&WHITEكافيكس بايت أند وايت
وايتكافيكس هو جل على أساس مائي برائحة النعناع و يحتوي على
هيدروكسيبايت و تراتالبيوتيسيوم.
يجدExSenseCavex BITE&WHITEكافيكس بايت
أند وايتكافيسمن الحساسية و يساعد على زيادة تبيض الأسنان بواسطة
الهيدروكسيبايت وعودة المعادن

التمية

24 مل 05 -جم (كافية للاستخدام حوالي 02 مره)ج
أنبوب

المكونات الأساسية لـ ExSenseCavex

كافيكسBITE&WHITE بايت أند وايتكافيس هيدروكسيبايت 2؛
تراتالبيوتيسيوم 01؛

التركيب

ماء، حلقة الشفاء المهدرجة (سورينول)، جليسرين،
إيزيثينول،بيوتيسيليك،المونوديوالمغنيسيوم،هي روكسيبايت، كلوريدالبيوتيسيوم، ترات
البيوتيسيوم،

فيوتراتانول، صفقاتراتان، بيروفساتالسيوم، حمضالطارتريك، النعناع،
سكارين الصوديوم.

تعليمات الاستخدام

1- قم تبيض الأسنان سواء في المكتب أو المنزل
- بعد عملية تنظيف هنية للأسنان
- ينع الحساسية و يحد منها

موانع الاستعمال

اللسان، أو الشفتين أو الجل. و بصفة عامة، يجب أن لا تستخدم
ExSenseCavex BITE&WHITEتحتفي هذه الاعراض بعد انتهاء
العلاج بضعة أيام . كافيكس بايت أند وايت اكسس في حالة وجود وجود الاستمرار في العلاج باستخدام تطبيقات أقصر حساسية للنعناع أو احدى
المكونات الأخرى

إجراءات الاستعمال

1- قم بتخصر و تنظيف الأسنان باستخدام الفرشاة و خيط الأسنان.
2. الاستخدام:

يؤن فيضة تبيض

قد نسيب صواني التبييض التي تمدد حتى اللثة نهجاً قد يكون معتدل إلى شديد
للأسجة اللبية، إذا كان مفاص صواني التبييض ملائماً، تأكد من أن المريض
يستخدم الكمية الصحيحة و بالطريقة، الصحيحةقد يكون على المريض تغلظ
كمية الجل في صواني التبييض

نصيحة الحفظ

- يحفظ في التلاجة (8°م) في مكان مظلم و جـا. ف لا تستخدم المادة
بعد انتهاء تاريخ الصلاحية.

نصيحة الحفظ

ExSenseCavex من صغير شرط صنع
BITE&WHITEكافيكس بايت أند وايت اكسس

ليظلم صنية التبييض بألمها. ادخل صنية التبييض
الجل جيداً على الأسنان. قم بالعض ببطء على صنية التبييض واترك الجل ليعمل
لمدة تتراوح من 5 إلى 10دقائق. ادخل صنية التبييض، ابقها أي جل زائد من
فمك و لا تشطف فمك. عاشطف الصنية بالماء.

3. اغلق دائماً الأنبوب بالغطاء بعد الاستعمال مباشرة. على أفضل النتائج،
ارجح عدم تناول
الطعام أو الشراب لمدة 03دقيقة على الأقل بعد استخدام الجل.
5. استخدام المنتج كل يوم لمدة 01ايام أو حسب تعليمات طبيب
الأسنان الخاص بك

التحذيرات وتعليمات الإسعافات الأولية

في حالة ملامسة العينين، قم بغسل العين بكمية كبيرة من الماء و قمباستشارة
طبيب. لا تستخدم المادة بعد انتهاء تاريخ الصلاحية.

نصيحة الحفظ

- يحفظ في مكان بارد و جاف (لا يجمد) و لا يتعرض لضوء الشمس
المباشر.


(

إنتاج كافيكس هولاند بي في

ونود الإشارة هنا إلى أن الرأي الفني الخاص بالشركة
سواء كان شفهياً أو خطياً أو عن طريق
التجارب هو رأي دون الالتزام بأي ضمان تجاه أي فرد أو أفراد يعاملون مع
مثل هذه الأضاف و يمنع ذلك أن يقوم كل من يقوم بتروءه بهذه الأضاف
بتجربتها أو إجراء أي تجارب عليها .
وحيث أن هذه التجارب خارج نطاق سيطرتنا وإشرافنا

فالأختراعات والتجارب هي مسؤولية هؤلاء الذين مع هذه الأضاف .
ونحن وضمن مسؤوليتنا المحدودة تجاه هذه

الأضاف و حسب ما جاء سابقاً على أنه الاستعداد لتعويض المستهلك بصفة الأضاف
فقط التي أسلفنا واستخدمت من هؤلاء المتعاملون معها وضمن بالتالي الجودة
المستمرة لجميع أضافنا ضمن ما جاء في النود العام للبيع والتوريد الخاصة بشركنا .

 Cavex Holland BV
Fustweg 5
2031 CJ Haarlem
The Netherlands
+31 23 530 77 00
dental@cavex.nl
cavex.nl

ZB 706 - 04

CAVEX